

Hygiene A-Z

Das Hygienekonzept für Ihre Praxis

dental
bauer



2018 | 2019



GERÄTE
AUSRÜSTUNG
ab Seite 9



SOFT- UND
HARDWARE
ab Seite 8




TEST-
VERFAHREN
ab Seite 14



PROKONZEPT®
dental bauer

PROKONZEPT®
HYGIENE-
MANAGEMENT
Seite 6

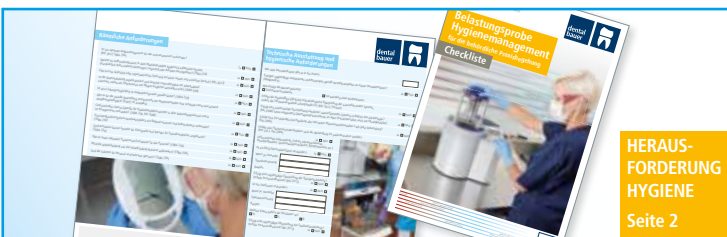


HERAUS-
FORDERUNG
HYGIENE
Seite 2



EINRICHTUNG
AUFBEREITUNGS-
RAUM
Seite 6



HYGIENE-
AUSRÜSTUNG
ab Seite 16

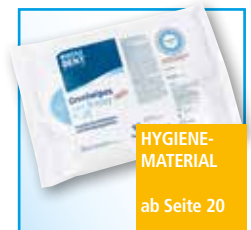

HYGIENE-
MATERIAL
ab Seite 20



INSTRUMENTE
ZUBEHÖR
ab Seite 26



PATIENTEN-
ZUBEHÖR
ab Seite 27

Jetzt über 60.000 Artikel
schnell und einfach im Online-
Shop bestellen!



SCHUTZ-
AUSRÜSTUNG
ab Seite 28



HAUT-
PFLEGE
ab Seite 31



KENNZEICHEN-
SYSTEME
Seite 32

Hotline
00800
77655440
bundesweit zum Nulltarif

www.
dentalbauer.de



Eine Vielzahl hygienischer Anforderungen bestimmt den Praxisalltag. Mit einem softwarebasierten Dokumentenmanagementsystem für alle Kernbereiche, wie PROKONZEPT[®] von dental bauer, gehen Soll- und Istzustand leichter Hand in Hand. Wie der ideale Hygienekreislauf funktioniert, erläutert die folgende Step-by-step-Anleitung von unserer Hygienespezialistin Yvonne Stadtmüller, PROKONZEPT[®] Vertriebs- und Produktmanagerin.

1 Bereitstellung

Die Bereitstellung an ausreichenden Instrumenten von 01-Untersuchungsbesteck über Hand- und Winkelstücke bis zur Turbine unterliegt folgenden Faktoren:

- Definierte Zeitblöcke, in denen die Aufbereitung stattfinden kann
- geschultes Fachpersonal
- entsprechende Schutzausrüstung
- erforderliche Hygienegeräte
- ein separater Aufbereitungsraum

2 Behandlung

- Alle Entnahmestellen der Behandlungseinheiten sollten für zwei Minuten vor Arbeitsbeginn und jeweils 20 Sekunden nach jeder Benutzung gespült werden.
- Die Reinigung und Desinfektion von Abformungen und zahn-technischen Werkstücken für das Labor erfolgt in einem geschlossenen Wannensystem mittels Tauchverfahren.
- Die Lagerung von kontaminierten Instrumenten kann nass oder trocken in Wannen, im Behandlungszimmer, dem Aufbereitungsraum oder im RDG vorgenommen werden.
- Die Instrumentenwannen sind mit Etiketten zu kennzeichnen, um das Produkt, die Charge, die Person und die Standzeit zu dokumentieren.

3 Vorbereitung der Aufbereitung

- Nur die Reinigung ist in der Lage, Rückstände aus der vorherigen Behandlung zu entfernen. Desinfektion und Sterilisation führen zwar potenziell zur Inaktivierung von Krankheitserregern, gehen aber mit einer Fixierung bis dahin nicht entfernter Verschmutzungen einher.
- Bei der Auswahl der Verfahren sind die Risikobewertung und Einstufung der Instrumente sowie die Herstellerangaben zu beachten.
- Als Schutzausrüstung bei der Aufbereitung von Instrumenten im

unreinen Bereich sind zu tragen: Schutzbrille mit Flankenschutz, Einmal-Mund-Nasen-Schutz, flüssigkeitsdichte und bedingt stichfeste Handschuhe und eine flüssigkeitsdichte, bedingt stichfeste Arbeitsschutzschürze, länderspezifisch darunter ein Einmalkittel mit langen Ärmeln und Abschlussbündchen.

4 Transport

- Der Transport der Instrumente zum Ort der Aufbereitung ist zügig, kontaminationsgeschützt und sicher vor Verletzungen sowie mechanischen Beschädigungen durchzuführen.
- Bei der Trockenlagerung in Instrumentenwannen sind lange Wartezeiten bis zur Aufbereitung wegen der Korrosionsgefahr und Reinigbarkeit zu vermeiden.
- Der maximale Zeitraum bis zur Aufbereitung ist schriftlich festzulegen.
- Die Transportsysteme müssen aufbereitungsfähig sein.
- Um Beschädigungen bei feinen und empfindlichen Medizinprodukten zu vermeiden, sind entsprechende Behältnisse mit Fixiermöglichkeiten und Haltevorrichtungen zu verwenden.

5 Abfallentsorgung

- Je nach gefahrenrelevanten Eigenschaften des Abfalls ist eine Zuordnung zu einem Abfallschlüssel erforderlich.
- Die Entsorgung von spitzen, scharfen oder zerbrechlichen Gegenständen sind in verschlossenen, stich- und bruchfesten Einwegbehältnissen wie Mediboxen vorzunehmen.
- Abfälle wie Röntgenchemikalien, Zähne mit Amalgamresten oder Abscheidegut aus Amalgamabscheidern, deren Entsorgung mit behördlichen Auflagen verbunden ist, sind in fest verschlossenen Behältern, nach Herstellerangaben an Recyclingfirmen oder Entsorgungsfachbetriebe abzugeben.
- Die Maßnahmen zur Abfallentsorgung sind in einem Hygieneplan und in gesonderten Arbeitsanweisungen festzulegen.
- Der Praxisbetreiber haftet bis zur endgültigen Entsorgung von problematischen Abfällen. Deshalb sind die Nachweisdokumente zwingend aufzubewahren.

6 Vorbereitung (Zerlegen, Vorreinigen, Ultraschall)

- Grundsätzlich müssen alle äußeren und inneren Oberflächen für die eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmittel zugänglich sein.

- Zur Vorbereitung müssen die Medizinprodukte so weit wie möglich zerlegt und demontiert werden. Es werden die Gelenke geöffnet und Hohlräume/Lumina zugänglich gemacht, dabei sind die Angaben zur Aufbereitung des Herstellers zu berücksichtigen.
- Empfindliche Instrumente können im Ultraschallbad schonend und gründlich gereinigt werden. Voraussetzung ist die Ultraschalltauglichkeit des Desinfektionsmittels und dass der Hersteller des Medizinprodukts eine Ultraschallreinigung erlaubt.
- Nach der Behandlung im Ultraschallbad werden die Medizinprodukte im Siebeinsatz unter fließendem kaltem Wasser abgespült, ggf. mit einer Nylonbürste nachgereinigt.
- Die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Ultraschallbads nach Herstellerangaben ist regelmäßig zu überprüfen und das Ergebnis ist in Papier oder EDV-Format zu dokumentieren.

7 Reinigung und Desinfektion

- Entsprechend der RKI-Richtlinie sind bis „Kritisch A-Medizinprodukte“ bevorzugt maschinell aufzubereiten. „Kritisch B-Medizinprodukte“ sind grundsätzlich maschinell aufzubereiten.
- Ein Thermodesinfektor/RDG muss vor Inbetriebnahme die Voraussetzungen und technischen Anforderungen nach der DIN EN ISO 15883 erfüllen.
- Wie bei der manuellen ist auch bei der maschinellen Reinigung die Wirksamkeit der Reinigungs- und Desinfektionsleistung der Geräte zu belegen. Das Ergebnis der Routineprüfung ist in Papierform oder digital zu dokumentieren.
- Spülanschlüsse für Hohlkörperinstrumente (ZEG-Spitzen, Hand- und Winkelstücke/Turbinen) sind dringend zu empfehlen.

8 Kontrolle auf Unversehrtheit und Sauberkeit

- Für die visuelle Beurteilung und Kontrolle ist eine Lichtlupe und ausreichende Umgebungshelligkeit erforderlich.
- Die Instrumente, insbesondere deren Innenflächen, Maulriefungen und Gelenke, sind zu kontrollieren auf:
 - Sauberkeit, – Korrosion/Rost, – Spannungsrisse, – Verformungen, – Brüche
- Sind bei einem Medizinprodukt Rückstände erkennbar und können diese auch durch eine erneute Reinigung nicht entfernt werden, so ist das Instrument aus dem Umlauf zu nehmen. Die Mängel sind zu dokumentieren, die Ursachen dafür zu identifizieren und zu beseitigen.



9 Pflege und Wartung

- Für die Ölung dürfen ausschließlich für das jeweilige Sterilisationsverfahren geeignete medizinisch geprüfte Pflegemittel verwendet werden. Diese müssen dampfsterilisationsfähig und dampfdurchlässig sein.
- Ist die Anzahl der maximal möglichen Aufbereitungen eines Instruments vom Hersteller festgelegt, muss eine Kennzeichnung, aus der die Anzahl und die Art der noch möglichen Aufbereitungen erkennbar ist, erfolgen.
- Sogenannte Kombinationsgeräte (Bsp. DAC Universal) ermöglichen alle Aufbereitungsschritte für Hand- und Winkelstücke sowie Turbinen in einem Gerät.
- Die Reinigung und Pflege der Spannzange von Übertragungsinstrumenten ist äußerst wichtig und wird manuell durchgeführt.

10 Funktionskontrolle

- Umfang und Art der Prüfungen sind vom Medizinprodukt spezifisch abhängig und müssen daher im Einzelfall geprüft, vom Hersteller in der Gebrauchsanweisung angegeben und in der Arbeitsanweisung der Praxis definiert sein.



- Die technisch-funktionelle Prüfung aller beweglichen Teile hat nach jedem Reinigungs- und Desinfektionsvorgang zu erfolgen.
- Beschädigte, verbogene oder nicht einwandfrei funktionierende Medizinprodukte werden aus dem Umlauf genommen und durch den Hersteller repariert oder ausgetauscht. Die Reparatur beziehungsweise der Austausch ist zu dokumentieren.

11 Verpackung

Das Sterilbarriersystem unterscheidet zwischen starren und weichen Verpackungen. Starr sind etwa Container, zur Kategorie weich zählt die Klarsichtfolie/Papier-Kombination.

- Bevor das Siegelgerät zum Einsatz kommt, sind Routinekontrollen durchzuführen und die Testverfahren zu dokumentieren (manuell oder digital).
- Bei Klarsichtfolie/Papier-Verpackungen darf das Instrument den Beutel nur bis zu einem Maximum von 75 Prozent ausfüllen, 25 Prozent Platz werden rund um das Medizinprodukt benötigt.
- Nach dem Siegeln muss oberhalb der Siegelnaht an einer Seite ein Überstand vorhanden sein – für die Kennzeichnung, und um ein ungehindertes Peelen sowie die aseptische Entnahme zu ermöglichen.
- Die Siegelnaht muss über die gesamte Breite und Länge intakt und vollständig versiegelt sein. Das Sterilbarriersystem darf ebenfalls nicht geknickt oder gefaltet werden.
- Klarsichtfolien/Papier-Verpackungen müssen einen Prozessindikator haben.
- Container müssen vor dem Packen nach Herstellerangaben gereinigt, desinfiziert und auf Verformung geprüft werden.

12 Sterilisation

- In der Regel kommen Dampf-Kleinsterilisatoren zum Einsatz. Wenn Instrument mit Hohlkörpern sterilisiert werden, muss ein Klasse B-Sterilisator eingesetzt werden. Mit einem Klasse S-Gerät können nur vom Hersteller spezifizierte Hohlkörper/Instrumente sterilisiert werden.
- Beim Beladen des Sterilisators mit Sterilisiergut ist Folgendes zu beachten:
 - Papier auf Papier, Folie auf Folie.
 - Weiche Verpackungen benötigen Spielraum, da sie sich während des Sterilisationsprozesses aufblähen.

- Nach Beendigung des Sterilisationsprozesses erfolgt die Überprüfung und Freigabedokumentation. Die verwendeten Chemoindikatoren werden ausgewertet und die Ergebnisse dokumentiert.

13 Dokumentation, Freigabe und Kennzeichnung

- Bei der dokumentierten Freigabe zur Anwendung ist Folgendes zu berücksichtigen:
 - Überprüfung des Hygienegerät-Protokolls sowie anschließendem Übereinstimmungscheck mit den ermittelten Prozessparametern aus dem Validierungsbericht.
 - Kontrolle der verwendeten Chargenkontrollsysteme auf Farbumschlag und Dokumentation der Ergebnisse.
 - Die Kontrolle der Medizinprodukte beinhaltet die Überprüfung der einzelnen Sterilgut-Verpackungen auf Beschädigung, Restfeuchtigkeit und die Prüfung auf Farbumschlag des Prozessindikators.
- Die Mindestaufbewahrungsfrist der Aufzeichnungen beträgt laut RKI fünf Jahre, zivilrechtlich nach Bürgerlichem Gesetzbuch 30 Jahre.
- Jedes Sterilbarriersystem wird wie folgt gekennzeichnet:
 - Angabe von Sterilisationsdatum und Chargennummer
 - Bezeichnung des Medizinprodukts bzw. Sets (wenn nicht ersichtlich)
 - Verfallsdatum
 - Name/Kürzel/Personalnummer der freigabeberechtigten Person

14 Lagerung

- Die Lagerung der Sterilgüter gemäß RKI-Richtlinie muss trocken, staubarm, sauber, bei Raumtemperatur und frei von Ungeziefer erfolgen.
- Starre Verpackungen können problemlos gestapelt werden, weiche Verpackungen verlangen wegen der Gefahr der Perforation eine schonende Lagerung.
- Instrumente in versiegelten oder verschlossenen Verpackungssystemen können geschützt sechs Monate, jedoch nicht länger als das Verfallsdatum gelagert werden. Ungeschützte Instrumente sollten innerhalb von vier Stunden gebraucht werden.
- Verpacktes Sterilgut ist laut RKI-Richtlinie trocken zu lagern, was eine Lagerung im Aufbereitungsraum ausschließt.



13 Dokumentation, Freigabe und Kennzeichnung



14 Lagerung



1 Bereitstellung



2 Behandlung



3 Vorbereitung der Aufbereitung



12 Sterilisation



11 Verpackung



10 Funktionskontrolle



9 Pflege & Reparatur



8 Kontrolle auf Unversehrtheit und Sauberkeit



7 Reinigung & Desinfektion (RDG)



6 Vorbereitung (Zerlegen, Vorreinigen, Ultraschall)



Fazit

Je besser die definierten Vorgaben in die eigenen Arbeitsanweisungen eingebunden sind, desto effizienter der Hygienekreislauf. dental bauer bietet mit PROKONZEPT® ein digitales Dokumentenmanagementsystem, das die wichtigsten Kernbereiche beinhaltet sowie aktuelle Gesetze bündelt. Schutz und Nutzen gehen damit Hand in Hand.

Möchten Sie wissen, ob Sie die „Belastungsprobe Hygienemanagement für die behördliche Praxisbegehung“ bestehen? Vereinbaren Sie einen Termin für eine unentgeltlich Hygieneberatung per E-Mail: prokonzept@dentalbauer.de



Angebote gültig bis 30.06.2019 oder solange Vorrat reicht. Preise verstehen sich rein netto ohne Abzug und sind nicht bonusfähig. Zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dental bauer GmbH & Co. KG (AGB), welche im Internet jederzeit unter www.dentalbauer.de eingesehen werden können. Alle Abbildungen nur symbolisch. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.

Digitales Management mit System

Sie bevorzugen eine professionelle und smarte Unterstützung bei der Vorhaltung der geforderten Dokumente?
Dann ist PROKONZEPT® für Sie das passende Instrument.
PROKONZEPT® ist ein softwarebasiertes Dokumentenmanagement-System für die wichtigsten Kernbereiche der Praxis:

- Gerätemanagement
- Hygienemanagement
- Praxismanagement
- Sammlung an Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen

Auf Knopfdruck haben Sie Zugriff auf sämtliche Arbeitsanweisungen, Prüfprotokolle, dem Bestandsverzeichnis usw.. Damit ist jede Praxis optimal, sicher und zuverlässig auf Praxisbegehungen vorbereitet und hat darüber hinaus eine perfekte Ergänzung des Qualitätsmanagement-Systems.

Neugierig geworden? Dann schicken Sie uns eine Email an: prokonzept@dentalbauer.de oder nutzen Sie hierfür anhängendes Faxformular.

PROKONZEPT®
dental bauer



Standard-Paket

- Grundpaket
- Gerätemanagement bis 5 Zimmer (pro weiteres Zimmer EUR 160,00)
- Laufzeit 2 Jahre

keine Material-Abnahme-Vereinbarung
(die Laufzeit beginnt zum 1. des Folgemonats zum Auftragsdatum)

EUR 5.990,00
zzgl. MwSt.

Premium-Paket

- Grundpaket
- Gerätemanagement bis 5 Zimmer (pro weiteres Zimmer EUR 160,00)
- Laufzeit 2 Jahre

Für alle Kunden die bereits eine Premiumvereinbarung abgeschlossen haben.
(mind. EUR 10.000,00 Material-Abnahme-Vereinbarung pro Jahr oder Umwandlung einer Startervereinbarung in eine Premiumvereinbarung, mind. EUR 10.000,00 Material-Abnahme-Vereinbarung pro Jahr, Nachbelastung bei Nichterfüllung EUR 2.000,00 im jeweiligen Folgejahr. Die Laufzeit beginnt zum 1. des Folgemonats zum Auftragsdatum.

EUR 3.990,00
zzgl. MwSt.

Fragen Sie nach unseren attraktiven Leasingangeboten!

EINRICHTUNG AUFBEREITUNGSRaum



Hygiene Basisschrank

Klappe mit Schließautomatik und Kunststofffront, mit zwei Mittelseiten, vorbereitet zur Aufnahme von:

- Seife- und Desinfektionsmittelpender
- Becher-, Papier- und Mundschutzspender
- 2x Handschuhe und Stauraum
- 1040 mm breit, 400 mm hoch und 326 mm tief

Art.-Nr. 685456

EUR 662,00
zzgl. MwSt.

SCHMID
Möbel

EINRICHTUNG AUFBEREITUNGSRaum

INOXKONZEPT®
designed by dental bauer

INOXKONZEPT® das durchdachte modulare Hygieneablaufsystem für „sichtbare Hygiene“ im Aufbereitungsraum. Mit INOXKONZEPT® entscheiden Sie sich für eine bis ins Detail überzeugende Hygienelösung, die durch puristisches Design aus Edelstahl, ohne organische Materialien, intuitive Funktionalität, hochwertige Qualität und lange Lebensdauer den heutigen Standard in puncto Ausstattung des Aufbereitungsraums setzt.



- 1 Müllschrank mit „touchfree“-Bedienung
- 2 Waschbeckenschrank
- 3 Einbauplatz für RDG
- 4 Installationsschrank
- 5 Schubladenschrank
- 6 Kanister-Abfüllstation
- 7 Tastatur und Dokumentations-Ordnerschrank
- 8 Edelstahlplatte mit Waschbecken ohne Überlauf
- 9 Funktionsaufkantung für Kabeldurchführungen, für Steckdosen oder Lichtlupe usw.
- 10 Spenderoberschrank

Preisbeispiel 1:

Die dargestellte Möbelzeile mit allen Schränken, inkl. Steckdosen ohne Geräte und Zubehör
L: 370 cm, T: 71 cm

EUR ab 12.590,00
zzgl. Montage und MwSt.



SOFT- UND HARDWARE

VISION MAXX

dios
MP
Hygiene Standard



Angebot 1: Software und Einbindung

Das VisionmaxX-Modulkonzept ermöglicht es, die reine Geräteanbindung auf die vorhandene EDV-Hardware aufzubauen. Benötigt werden lediglich ein vorhandener, beliebiger PC in Ihrer Praxis sowie ein Netzwerkanschluss im Sterilisationsraum.

Das Angebot umfasst:

- dios MP Hygiene Std.
- notwendiger Kabelsatz für die Hygienegeräte
- ComServer für die Übertragung der Protokolle über das Netzwerk
- Installation der Hardware und der Software dios Hygiene Std. in Ihrer Praxis
- Konfiguration der Geräte in dios
- Kurzeinweisung
- Standard-Anfahrtpauschale

* Es können Folgekosten für erweiterte Anfahrt, Installation, Einweisung, Hardware je nach Praxissituation entstehen.

EUR
1.400,00*

Angebot 2: Computer, Software und Einbindung

Diese Ausbaustufe der Dokumentation erfolgt über eine eigene EDV-Hardware im Sterilisationsraum. Benötigt wird hierfür ein Netzwerkanschluss im Aufbereitungsraum. Falls kein Netzwerkanschluss vorhanden ist, können Alternativen wie WLAN geprüft werden.

Das Angebot umfasst:

- dios MP Hygiene Std.
- PC-Monitorlösung All-in-One 22" in Farbe Weiß (CPU Intel i3, 8 GB Arbeitsspeicher, 120 GB SSD, Windows 10 Pro)
- Wandbefestigung für All-in-One-PC
- desinfizierbare Tastatur- und Mauslösung
- notwendiger Kabelsatz für die Hygienegeräte
- ComServer für die Übertragung der Protokolle über das Netzwerk
- Etikettendrucker, 1.000 Stück Haftetiketten
- Barcodescanner USB
- Installation der Hardware und der Software dios MP Hygiene Std. in Ihrer Praxis
- Anbindung von dios MP an Ihre Patientenverwaltungssoftware
- Konfiguration der Geräte in dios MP

* Es können Folgekosten für erweiterte Anfahrt, Installation, Einweisung, Hardware je nach Praxissituation entstehen.

EUR
3.500,00*

VISION MAXX

Hygiene-Mouse

- Robuste, versiegelte Maus
- versiegeltes Silikondesign für eine staubfreie, keimfreie und wasserresistente Anwendung
- mit Wasser und Seife, Desinfektionsmitteln oder 10% Bleiche zu reinigen
- 3 Tasten für Scrollfunktion
- USB Plug & Play
- Abmessung 11 cm x 6 cm x 4 cm
- 10 Jahre Garantie



Auslieferung und Rechnungsstellung durch unseren Partner VisionmaxX GmbH.

EUR
122,00



Hygiene-Keyboard

- Wasserdichte, desinfizierbare, geräuschlose 30 cm Tastatur
- versiegeltes Silikondesign für eine staubfreie, keimfreie und wasserresistente Anwendung
- mit Wasser und Seife, Desinfektionsmitteln oder 10% Bleiche zu reinigen, selbst im laufenden Betrieb durch Tastensperre
- keine mechanischen Bauteile
- exzellenter, geräuschloser Tastenanschlag
- USB Plug & Play
- Abmessung: 30 cm x 14 cm x 1,5 cm
- 10 Jahre Garantie

Auslieferung und Rechnungsstellung durch unseren Partner VisionmaxX GmbH.

EUR
179,00



USB-Datenlogger

USB-Datenlogger zur Temperaturkontrolle für die Lagerung von pharmazeutischen, medizinischen sowie anderen temperatursensiblen Produkten wie z. B. im Kühlschrank.

Auslieferung und Rechnungsstellung durch unseren Partner VisionmaxX GmbH.

EUR
75,00

GERÄTE-AUSRÜSTUNG

MELAG
competence in hygiene



Vacuclav 40 B+ Evolution mit MELAdem 53

Der Premium Schnell-Autoklav. Ideal und praktisch für die Zahnarztpraxis, die in nur 17 Minuten Gesamtbetriebszeit verpackte Instrumente im Schnell-B Programm und sogar nur 10 Minuten unverpackte Instrumente sterilisieren möchte. Jeweils inklusive fraktioniertem Vor-Vakuum und Trocknung! (ausschließlich nutzbar bei Anschluss von vorhandenem RDG)

- Vacuclav 40 B+**
- 8 Tablets
 - MELAdem 53
 - CF-Karte
 - Lesegerät
 - MELAcontrol Pro
 - Wasserverteiler

Art.-Nr. 733486

EUR
8.490,00



Abbildung enthält optionales Zubehör

MELAtherm 10 mit Grundbestückung

MELAtherm 10 ist ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) nach Europa-Norm EN 15883. Das Gerät ist bei der maschinellen Aufbereitung von Instrumenten ideal einsetzbar. Mit aktiver Trocknung und kurzen Betriebszeiten. MELAtherm 10 überwacht automatisch die Rotation der Sprüharme, den Sprühdruk und die Filtersiebe. Fehler im Programmablauf oder Bedienungsfehler werden vermieden.

MELAtherm 10 DTA 400 V*

- 1x Basiskorb mit Injektorschiene, inkl. 2 Zentralfilter (nur bei Variante mit Zentralfilter)
- 1x Kartenlesegerät für MELAflash,
- 1x Flexkorb 2,
- 1x Einsatzgestell für 3 MELAstore,
- 3x MELAstore-Tray 100,
- 1x Einsatzgestell für Abdrucklöfel,
- 1x Kleinteile-Behälter,
- 1x Instrumentenkorb standard 1

Art.-Nr. 754504 ohne Zentralfilter
Art.-Nr. 411492 mit Zentralfilter

*Alternativ auch als DTB Variante mit 230 V erhältlich

EUR
8.450,00
(ohne Zentralfilter)

EUR
8.690,00
(mit Zentralfilter)



Folienhalter kurz

Der Halter ermöglicht das senkrechte Sterilisieren von eingeschweißtem Sterilgut.

- für optimale Trockenergebnisse
- geeignet für Sterilisationstyp 30 B+/31 B+/40 B/41 B
- Kesseltiefe: 35 cm (kurz)
- bis 18 Liter Volumen

Art.-Nr. 340488 Stück

EUR
91,50

Folienhalter lang

Der Halter ermöglicht das senkrechte Sterilisieren von eingeschweißtem Sterilgut.

- für optimale Trockenergebnisse
- geeignet für Sterilisationstyp 23 B+/24 B+/43 B/44 B
- Kesseltiefe: 45 cm (lang)
- bis 24 Liter Volumen

Art.-Nr. 473535 Stück

EUR
91,50

Paket 1:

Für den Basiskorb mit Injektorschiene ohne Zentralfilter:

- 1x Injektorkorb Flex 1
- 6x ZEG-Spitzen Adapter
- 2x Einzelfiltergehäuse

wahlweise:

- 2x Metall-Filterzscheibe. Alle 20 Zyklen im Ultraschallbad aufbereitbar. Im Paket für insgesamt 400 Zyklen einsetzbar
- oder 2x Keramik-Filterzscheibe, je 10 Stück. Alle 20 Zyklen auszuwechseln. Im Paket für insgesamt 200 Zyklen einsetzbar.

Art.-Nr. 754513

EUR
634,00

Paket 2:

Für den Basiskorb mit Injektorschiene mit Zentralfilter:

- 1x Injektorkorb Flex 1
- 6x ZEG-Spitzen Adapter
- 1x Zentralfilter

Als Ersatz, wenn der bisherige Zentralfilter erschöpft ist.

Art.-Nr. 748182

EUR
526,00

Angebote gültig bis 30.06.2019 oder solange Vorrat reicht. Preise verstehen sich rein netto ohne Abzug und sind nicht bonusfähig. Zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dental bauer GmbH & Co. KG (AGB), welche im Internet jederzeit unter www.dentalbauer.de eingesehen werden können. Alle Abbildungen nur symbolisch. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.

Hotline
00800
77655440
Bundesweit zum Nulltarif

www.
dentalbauer.de



GERÄTE-AUSRÜSTUNG



DÜRR DENTAL

Abbildung enthält optionales Zubehör

Hygopac Plus

Validierbares Durchlaufsigelgerät gemäß DIN EN ISO 11607-2 für die optimierte Versiegelung von Klarsichtsterilisierverpackungen. Siegeltemperatur, Anpressdruck und Siegelgeschwindigkeit lassen sich nachvollziehen und werden vom Gerät ständig erfasst, überprüft und gespeichert.

- intelligentes Validierungskonzept
- Prozesskontrolle anhand der wichtigen Siegelparameter Druck, Temperatur, Zeit
- Datenspeicherung auf SD-Karte oder im Praxis-Netzwerk, auch mittels Software
- hohe Siegelgeschwindigkeit (10 m/min)
- minimaler Platzbedarf
- intuitive Bedienung über das neue Geräte-display
- elegantes, funktionales Design
- wahlweise zur Wandmontage oder zur Aufstellung auf der Arbeitsplatte; kombinierbar mit und ohne Hygopac Plus Instrumententisch

EUR 1.669,00

Art.-Nr. 627664 Stück

Instrumententisch

Art.-Nr. 627663 Stück

EUR 169,00

Folienhalter

Art.-Nr. 627662 Stück

EUR 377,00

MELAG
competence in hygiene



MelaSeal Pro

Validierbares Durchlaufsigelgerät. Das leistungsfähige Durchlauf-Siegelgerät ist schnell, effektiv und für den Dauerbetrieb geeignet.

- Fehlervermeidung durch intuitive Bedienung mit Softkeys und LCD-Display
- Rechtssicherheit durch Erfüllung der Anforderungen, validierbar gemäß ISO 11607-2
- Dokumentation über CF-Card oder Computer-Anschluss möglich
- Sparsam durch Energiesparfunktion
- Schnell durch hohe Durchlaufgeschwindigkeit von 8 m/min.
- Zusätzliche Sicherheit durch Siegelnahtbreite 14 mm
- Integrierte Schnittstelle für Drucker, CF-Card-Printer oder PC
- Relevante Parameter wie Druck, Zeit und Temperatur werden vom integrierten computergestützten Kontrollsystem erfasst und können über die RS 232-Schnittstelle archiviert werden

Art.-Nr. 350199

EUR 1.959,00



Inklusive Montageadapter!

Lupenleuchte

3 Dioptrien mit LED-Beleuchtung, beweglich durch flexibles Edelstahlrohr. Montageadapter für Klemmfuß, Wandhalterung, Tischfuß inklusive.

Art.-Nr. 725929 Stück

EUR 279,00

Die Lupenlampe ist dank modularem INOXKONZEPT® voll im Hygieneablauf integrierbar.



GERÄTE-AUSRÜSTUNG

Dentsply Sirona



Anerkanntes, validierbares Kombinationsgerät

Dentsply Sirona DAC Universal

Der Kombinationsautoklav reinigt, ölt (bei Bedarf) und desinfiziert bzw. sterilisiert bis zu sechs Hand- und Winkelstücke, Turbinen, Ultraschallhandstücke und -spitzen, sowie Düsen von Multifunktions-spritzen und Pulverstrahlgeräten auf Knopfdruck

- DAC Universal inkl. Standard-Deckel mit 6 Adaptern nach Wahl
- Installationskit nach Wahl

Art.-Nr. 700956

EUR 5.690,00

Zubehör für Dentsply Sirona DAC Universal

	Art.-Nr.	EUR
Nitram Oil #2 6 x 200 ml Dosen, weiß Wrapped Ready	325759	EUR 67,20
Nitram Oil 6 x 200 ml Dosen, weiß	432253	EUR 67,20
DAC Universal Filter Packung: 6 Stück	443323	EUR 37,90
NitraDem Filter 8M Länge 8 Meter, 1 Stück	334386	EUR 122,00
DAC Universal Reinigungstabs Packung: 50 Stück	750490	EUR 16,90



Flex-Deckel

Ohne Adapter. Für alle Dentsply Sirona Geräte ab SN 104.000 (MK3, blaues Text-Display, Markteinführung 2009) SW-Update und Validierung notwendig!

Art.-Nr. 702684 Stück

EUR 429,00

Adapter-Vielfalt Flex-Deckel für Dentsply Sirona-Produkte

	Art.-Nr.
Scaler Tip Adapter für alle Dentsply Sirona US-Tips	702687
Scaler TL Adapter für Teneo und Sinius	702685
Scaler L Adapter für Intego pro, C+ und M+	702818
SPRAYVIT 4000 Adapter für M1, C (o. Abb.)	702819
SPRAYVIT Adapter für Teneo Sinius, Intego pro, C+, M+	702686

für EMS-Produkte

	Art.-Nr.
Tip Adapter* für EMS Scaler- und Paro-Tips	733989
Piezon Handstück Adapter* für Handstücke EN-060, EN-061	741777
AIR-FLOW Handy 3.0 Düsen Adapter* für AIR-FLOW-Handy 3.0 EL-545, EL-542, EL-540	745803
AIR-FLOW Handstück Düsen Adapter* für AIR-FLOW-Handstück EL-308, EL-354	746189

für Satelec-Produkte

	Art.-Nr.
Handstück Adapter* für Satelec Slim	746955
Handstück Adapter* für Satelec Newtron	746954
Handstück Adapter* für Satelec Newtron LED	746956
Tip Adapter* für Satelec Scaler- und Paro-Tips	733990

EUR 78,50

* zugelassenes Aufbereitungsverfahren für diese Produkte

Angebote gültig bis 30.06.2019 oder solange Vorrat reicht. Preise verstehen sich rein netto ohne Abzug und sind nicht bonusfähig. Zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dental bauer GmbH & Co. KG (AGB), welche im Internet jederzeit unter www.dentalbauer.de eingesehen werden können. Alle Abbildungen nur symbolisch. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.

Hotline
00800
77655440
bundesweit zum Nulltarif

www.
dentalbauer.de



GERÄTE-AUSRÜSTUNG

GERÄTE-AUSRÜSTUNG

SciCan



Abbildung enthält optionales Zubehör

HYDRIM® M2 G4 Thermodesinfektor

- Erfüllt die internationalen Standards DIN-EN-ISO 15883-1/-2 für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
- Das Gerät kann unter der Arbeitsplatte der Hygienezeile eingebaut oder freistehend platziert werden
- Der validierbare Prozess garantiert reproduzierbare Reinigungs- und Desinfektionsergebnisse
- Kapazität von zehn 8x11 Instrumentenkassetten
- Die HIP Reinigungslösung wird platzsparend seitlich im Gerät eingesetzt
- Prozessdokumentation über USB-Anschluss oder Netzwerk für Datenspeicherung
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Bedienerfreundlicher Farb-Touchscreen
- Aktivlufttrocknung, Rollwagen und Dosierpumpe für flüssigen Reiniger
- Optionales Innenreinigungssystem für bis zu 12 Hand- & Winkelstücke
- Das Innenreinigungssystem verfügt über einen wiederverwendbaren Wasserfilter

Im dental bauer Paket enthalten:

- HYDRIM® M2 G4 (M2WD-D02-G4)
- Paket-Reiniger (CS-HIPL)
- LCS-System (Schiene f. Innenreinigung 12x) (01-114405S)
- Adapter nach Wahl (11 Stück Intramatic/Turbine) (div.)
- ZEG-Adapter (5 Plätze inkl. Schlüssel) (01-114841)
- kleine Siebkörbe offen (neben der LCS-Schiene, offen) (01-114818)
- Vertikalkorb für stehende Instrumente (01-110411S)
- langer Korb (offen, mit Halterungen) (01-108232)
- halbes Gestell (5 Kassetten oder Trays) (01-109964S)

* abgebildetes Instrumentarium nicht im Preis enthalten.

Art.-Nr. 754506

EUR
8.190,00



Abbildung enthält optionales Zubehör

HYDRIM® C61WD LCS G4 Thermodesinfektor Tischgerät

- EN 15883-1/-2 konform
- mit Aktivlufttrocknung, Rollwagen und Dosierpumpe für flüssigen Reiniger
- platzsparend – Reinigungslösung integriert
- netzwerk- und internetfähig
- Prozessdokumentation über USB oder Netzwerk möglich

Im dental bauer Paket enthalten:

- HYDRIM® Tischgerät C61 LCS G4 mit Winkelstückaufbereitung
- Paket Reiniger
- LCS-System (Schiene für Innenreinigung 8x)
- Adapter nach Wahl (7 Stück Intramatic/Turbine)
- ZEG-Adapter mit Halterung (5 Plätze inkl. Schlüssel)
- Vertikalkorb für stehende Instrumente
- Gestell für Körbe (2 Ebenen-Beladung)
- Korb Statim 2000 (zwei offene Siebkörbe)
- Korb (untere Ebene zur Beladung, offen)

* abgebildetes Instrumentarium nicht im Preis enthalten.

Art.-Nr. 642477

EUR
6.490,00

SciCan



STATIM® 5000 G4 Kassettenautoklav

Durch die perfekte Mischung aus Geschwindigkeit und Kapazität zeichnet sich der STATIM® 5000 G4 als Zusatzgerät zum Klasse B Autoklav aus. Die herausnehmbare Kassette bietet die Möglichkeit, größere Mengen mit kurzen Zykluszeiten zu sterilisieren – für unverpackte sowie verpackte Hohlkörper-Instrumente. Über das One-Touch-Tastenfeld des STATIM® können Sie zwischen vier vollautomatischen Sterilisationsprogrammen wählen.

- 8:45-Minuten-Zyklus für unverpackte Festkörper-Instrumente
- 15:30-Minuten-Zyklus für verpackte Instrumente (kritisch B)
- Dri-Tec-Trocknungstechnologie
- Steriler Transport von Instrumenten
- Geringere Ausgaben für Instrumente
- Schonende Behandlung der Instrumente
- EN13060 normkonform, nachweislich auch für kritische Instrumente, wie z. B. Hand- und Winkelstücke geeignet
- Validierbar
- Integrierter Datalogger
- Prozessdokumentation möglich, Netzwerk und Internetfähig

Art.-Nr. 423310

EUR
5.290,00

'GCI'



D-LIGHT® PRO LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge

Die D-Light Pro bietet nicht nur eine effiziente Lichthärtung, sondern hilft Ihnen, Bakterien sichtbar zu machen. Die D-Light Pro ist autoklavierbar und sorgt damit für maximale Hygiene – zum optimalen Schutz des Patienten.

- 3 Modi: aushärten, schützen, erkennen
- duale Wellenlänge (blau, violett)
- elegantes, leichtes, schlankes Design
- Ladestation mit zwei Wechselakkus
- Handstück und Lichtleiter autoklavierbar

Art.-Nr. 736802



NEU!
Autoklavierbar!

EUR
799,00

BANDELIN
Ultraschall seit 1955



Bandelin SONOREX SUPER RK 102H Basisgerät

- Tropfwassergeschütztes Edelstahlgehäuse
- Zeitgeber 1-15 Minuten oder Dauerbetrieb
- Typ „H“ mit Heizung 30-80 °C
- SweepTEC®
- Netzanschluss 230 V~ (±10 %), alternativ 115 V~ (±10%), 50/60 Hz
- Abmessungen außen
L x B x H: 260 mm x 160 mm x 250 mm

Art.-Nr. 446113 Stück

EUR
739,00

Zubehör für SONOREX

	Art.-Nr.	
Lochdeckel zur Aufnahme von 2 Einsatzgefäßen Typ DE 100, inkl. Gummiring GR, Stück	463366	EUR 27,50
Glas 600 ml. DD 06 TYP SD 06, Maße Ø 84 mm x Höhe 125 mm, Stück	446344	EUR 14,90
Einhängerkorb aus Kunststoff, Boden gelocht – für empfindliche Oberflächen Typ PK 2 C. Maße L x B x H: 187 mm x 90 mm x 56 mm, Stück	416780	EUR 35,50
Folientestrahmen FT 4 zum Prüfen von Ultraschallbädern, aus Edelstahl Maße L x B: 160 mm x 200 mm, Stück	328848	EUR 19,90



TESTVERFAHREN



Omni Wash-Test

Zur Überprüfung der Desinfektionsleistung (Funktions-test) des RDG (Thermodesinfektor). Dieses Testsystem überprüft die maschinelle Reinigung und Desinfektion Ihres RDG. Testanhaftungen überprüfen sowohl die Leistung der Sprüharme als auch eine ggf. entstandene Über-/Unterdosierung. Zwingend erforderlich zur Validierung Ihres Thermodesinfektors. Die separat erhältliche Omni Wash-Test-Prüfleiste dient zur Aufnahme des Omni Wash-Tests und zur Platzierung im Thermodesinfektor. Edelstahl, schwere Ausführung.

EUR
48,90
(Prüfleiste)

Art.-Nr. 706280 Prüfleiste

Art.-Nr. 705879 Indikatorplättchen:
100 Stück

EUR
159,90
(Indikatoren)



Omni Bowie & Dick-Test

Einmaltestpaket für den täglichen Bowie & Dick-Test im Dampfautoklaven nach DIN EN 13060 (Klasse B).

Art.-Nr. 712536 Stück

EUR
3,90



Omni Helix-Test

Omni Helix Test ist ein Sterilisations-Kontrollsystem für alle B Autoklaven. Der Testkörper ist nach 250 Zyklen auszutauschen.

Art.-Nr. 347050 Packung: 1 Testkörper,
300 Teststreifen

EUR
105,70



Für Ihr Folien-
schweißgerät

Omni Seal-Test

Omni Seal-Test dient zur Überprüfung einer durchgehenden und schadenfreien Siegelnaht mit einer Mindestbreite von 6 mm und Funktionsbeurteilung.

Art.-Nr. 347045 Packung: 100 Seal Tests

EUR
30,90



Omni Ink-Test

Einmal-Testpipetten zur routinemäßigen Überprüfung von Siegelnähten (Tintentest). Für Sterilgutbeutel mit Seitenfalte.

Art.-Nr. 727492 Packung: 30 Pipetten

EUR
32,90



3M™ Indikator Dentsply Sirona DAC Universal

Klasse 5 Chemoindikator zur Kontrolle der korrekten Funktionsweise des Sirona DAC Universal Sterilisators. Befestigen Sie den Indikator im Klammerhalter und diesen am Deckel des DAC. Chemoindikator, der im Anzeigeverhalten einem Bioindikator entspricht; der Farbumschlag verläuft parallel zur Absterbekurve eines biologischen Indikators. Erfüllt ISO 11140-1 sowie EN 867-1 und EN 867-2.

Art.-Nr. 356747

Packung: 100 Test-Indikatoren

EUR
63,00



Dentsply Sirona DAC Universal-Halter für Indikator

Art.-Nr. 319801

Packung: 1 Klammerhalter

EUR
37,60



Dentsply Sirona DAC Universal Sporentest

Prüfkörper (PCD) für den Dampfdurchdringungstest. Es können chemische und biologische Indikatoren in den Prüfkörper eingelegt werden, um routinemäßig die Sterilisationsleistung im Inneren der Instrumente zu kontrollieren. Als wöchentliche Routinekontrolle durchzuführen.

Art.-Nr. 439568 Stück

EUR
117,90



Dentsply Sirona DAC Universal ISO/INTRAmatic-Adapter

Adapter für Deckel „Standard“ am DAC Universal. Zur Montage des Prüfkörpers Sirona DAC Universal Sporentest auf dem Sirona DAC Deckel „Standard“ ist ein Adapter ISO/INTRAmatic erforderlich.

Art.-Nr. 654826 Stück

EUR
89,50



Medisafe „MediCheck Proteinschnelltest“

Test zum Nachweis von Resteiweißen auf Oberflächen von Instrumenten oder RDGs, Ultraschallgeräten, Sirona DAC etc. Dieser Test gewährleistet einfache Anwendung und höchste Sensitivität mit Inkubation. Das Resultat liegt in 15 Minuten vor.

- Empfehlung von Sirona: wöchentliche Anwendung im DAC
- Sensitivität von 10 µg Restprotein bei Raumtemperatur und 1 µg Restprotein bei Inkubation
- klarer Farbumschlag, konform zur EN 15883
- angefeuchteter Tupfer

Art.-Nr. 652535 Packung: 25 Stück

EUR
190,00



TESTVERFAHREN



SteamSensor S

Spezielles chemisches Indikatorsystem zur Überwachung der Dampfsterilisation nach DIN EN ISO 11140-1 Klasse 5 zur Überwachung der Sterilisationszyklen N und S (z.B. DAC Universal, Statim-Kassettenautoklaven, Euroklav, Schnellprogramme etc.)

Art.-Nr. 744916 Packung: 200 Stück

EUR
28,80



Bowie & Dick-Test

134 °C / 3,5 Minuten täglicher Funktionstest für Dampfsterilisatoren nach DIN EN 13060, DIN EN ISO 17665.

Art.-Nr. 545498 Packung: 15 Stück

EUR
75,90



RDG-Sensor Protein

RDG-Sensor Protein ist eine einfache, routinetaugliche Nachweismethode von Proteinrückständen auf den Oberflächen von medizinischen Instrumenten/ Medizinprodukten.

Art.-Nr. 412421 Packung: 5 Stück

EUR
39,90



MELAcontrol und MELAcontrol PRO sind Prüfkörper nach EN 867-5 zur Chargenkontrolle und zur Funktionsprüfung von Klasse B-Autoklaven. Beide Prüfsysteme ermöglichen eine sichere Bewertung der Sterilisation.

MELAcontrol® – Praxis-Set

Set besteht aus: 1 Prüfkörper (Helix) und 250 Stück Indikatorstreifen. Bei MELAcontrol werden die 250 Teststreifen stets mit einem neuen Prüfkörper geliefert.

Art.-Nr. 399168 Set

EUR
143,90



MELAcontrol® – PRO

Set besteht aus: 1 Prüfkörper (Helix) und 40 Indikatorstreifen. Bei MELAcontrol PRO wird der Prüfkörper einmalig angeschafft, die Teststreifen können kostengünstig nachbestellt werden.

Art.-Nr. 361408 Stück

EUR
182,90



Wash-Checks H Dental Prüfkörper & Indikatorplättchen

Indikatorsystem zur Prüfung der Reinigungswirkung in Hohlkörper Instrumenten wie Turbinen, Hand- und Winkelstücke im RDG. Der Wash-Checks H Dental Prüfkörper muss, je nach Gerätetyp, mit einem speziellen Adapter bestellt werden.

Art.-Nr. 545497 Indikatorplättchen: 100 Stück

EUR
179,00
(Indikatoren)



Adaptervarianten:

Melag und Miele:

Der Wash-Checks H Dental Prüfkörper kann mit montiertem Adapter direkt in die Injektorschiene mit Zentralfilter eingeschraubt werden.

Art.-Nr. 750695 Prüfkörper + Adapter

EUR
160,20

Miele:

Der Wash-Checks H Dental Prüfkörper mit montiertem Adapter kann direkt in die einzel Silikonadapter von Miele für Übertragungsinstrumente bei Nutzung der Aufnahme 1 (AUF 1) oder 2 (AUF 2) eingesteckt werden.

Prüfkörper + Adapter mit 16 mm Außendurchmesser Art.Nr. 754480

Prüfkörper + Adapter mit 20 mm Außendurchmesser Art.Nr. 753291

Prüfkörper + Adapter mit 22 mm Außendurchmesser Art.Nr. 754481

EUR
149,00
(16 mm)

EUR
165,00
(20 mm)

EUR
167,00
(22 mm)

Wash-Checks U Prüfkörper & Indikatorplättchen

Chemisches Testsystem zur Überprüfung der Reinigungsleistung von Ultraschall-Reinigungsgeräten.

Art.-Nr. 406968 Prüfkörper

Art.-Nr. 396076 Indikatorplättchen:
100 Stück

EUR
42,90
(Prüfkörper)

EUR
199,00
(Indikatoren)



Wash-Checks RDG Prüfkörper & Indikatorplättchen

Chemisches Testsystem zur Überprüfung der Reinigungsleistung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG).

Art.-Nr. 406968 Prüfkörper

Art.-Nr. 482156 Indikatorplättchen:
100 Stück

EUR
42,90
(Prüfkörper)

EUR
199,00
(Indikatoren)



InkTest Pro Tintentest, Methode A – 4 Seiten Test

Tintentest für die routinemäßige Überprüfung von Siegelnähten gemäß ISO 11607-1 sowie ASTM F1929. Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten (z. B. Kanäle) werden sofort nach dem Aufdrücken der Einwegkartusche sichtbar. Für das Befüllen sind keine Pipetten oder sonstigen Hilfsmittel mehr erforderlich.

Art.-Nr. 695322
Packung: Rundbox Ø 120 mm
30 Einwegkartuschen, Anleitung

EUR
34,40



Angebote gültig bis 30.06.2019 oder solange Vorrat reicht. Preise verstehen sich rein netto ohne Abzug und sind nicht bonusfähig. Zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dental bauer GmbH & Co. KG (AGB), welche im Internet jederzeit unter www.dentalbauer.de eingesehen werden können. Alle Abbildungen nur symbolisch. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.



HYGIENE-AUSRÜSTUNG



Hygobox
Robuste, widerstandsfähige Desinfektionsbox mit einem Fassungsvermögen bis zu 3 Liter. Füllanzeige für 1, 2 und 3 Liter. Geeignet für die Tauchdesinfektion und Reinigung von Instrumenten oder von bis zu 6 Abformungen sowie prothetische Arbeiten. Sicherer Transport durch ergonomisch geformte Tragegriffe. Kippsichere Abtropfposition für den Siebeinsatz. Maße (H x B x T): 13 cm x 32,5 cm x 21 cm

Art.-Nr. 415607 Stück Wanne grau
Siebeinsatz weiß
Deckel blau **EUR 46,50**



Aufkleber Desinfektionswannen

Aufkleber zum Beschriften von Desinfektionswannen

Art.-Nr. 442459 Packung: 4 Stück **EUR 3,90**



Dürr Abdruck-Desinfektionsdose

Abdruck-Desinfektionsdose zur Tauchdesinfektion und Reinigung mit MD 520 in nur 5 Minuten. Spezielle Aufhängevorrichtung für max. 2 Abformlöffel. Maße: H 18,5 cm, Ø 11,8 cm

Art.-Nr. 340148 Stück **EUR 17,20**



**Touchless mini
Automatisches Wandspendersystem**

Automatischer Spender für flüssige Medien (Seife, Desinfektionsmittel, Gel, Lotion), einstellbar in 4 Dosiermengen (2 – 6 ml) mit Einwegpumpe, passend für alle Seifen und Händedesinfektionslösungen.

Art.-Nr. 752686 Stück **EUR 134,00**



**Austauschpumpe für
„Touchless mini“ Spendersystem**

Kunststoffeinwegpumpen. Die Pumpen können bei Bedarf (spätestens nach 6 Monaten) kostengünstig getauscht und danach Sortengerecht entsorgt werden.

Art.-Nr. 752688 Stück **EUR 3,90**



Skalpellklingen-Entfernungsbox

Zum sicheren Abnehmen und Sammeln von gebrauchten Skalpellklingen (für ca. 100 Stück)

Art.-Nr. 416856 Stück **EUR 6,50**



Endo Guard Zirc

Endo Guards organisieren alle manuellen oder maschinellen Endoinstrumente. Der verschiebbare Slide-Adapter ermöglicht die sichere Dokumentation der Benutzungshäufigkeit der Instrumente. Jeweils integriert ist eine Messlehre und Ablageschwämme. Endo Guards sind autoklavierbar. Abmessung: 14,1 cm x 1,3 x 5,1 cm, Farbe neonblau

Art.-Nr. 392042 Stück für 11 Maschinen- und 5 Handinstrumente
Art.-Nr. 344480 Stück für 16 Handinstrumente

EUR 34,50
pro Artikelnr.



Transport- und Materialwanne

Die Transport- und Materialwanne ermöglicht sicheren Transport vom Hygienebereich zum Behandlungszimmer und zurück. Eine verriegelbare Abdeckhaube sichert zusätzlich den geschlossenen und geschützten Transport. Desinfizierbar.

Materialwanne: 31,1 cm x 27,6 cm x 7,0 cm, autoklavierbar 136 °C, antimikrobieller Schutz, Farbe blau, Verriegelbare Abdeckhaube: 32,4 cm x 30,0 cm x 3,5 cm, Farbe Transparent

Art.-Nr. 476935 Materialwanne
Art.-Nr. 477034 Abdeckhaube

EUR 21,50
pro Artikelnr.

Steri Bur Guard Halter erleichtern die Organisation und Zuordnung aller rotierenden Instrumente. Bohrer oder Fräsen werden während der Wiederaufbereitung sicher fixiert. Der Halter schützt Ihre Bohrer nicht nur während der Reinigung und der Sterilisation, sondern kann auch in drei verschiedenen Winkeln aufgestellt werden, um am Behandlungsplatz einfachen Zugriff zu haben.



Steri Bur Guard 22 Loch blau

Steri Bur Guard für 22 Bohrer
Farbe blau, autoklavierbar

Art.-Nr. 455898 Stück **EUR 18,00**



Steri Bur Guard 12 Loch blau

Steri Bur Guard für 12 Bohrer
Farbe blau, autoklavierbar

Art.-Nr. 466829 Stück **EUR 17,00**



Steri Bur Guard 12 Loch chir. blau

Steri Bur Guard für 12 hohe chirurgische Instrumente
Farbe blau, autoklavierbar

Art.-Nr. 385383 Stück **EUR 18,00**

HYGIENE-AUSRÜSTUNG



Omni-Z Wandspender

Der ideale Spender für Ihre Omni-Z Einmal-Fal-handtücher. Gehäuse aus Kunststoff, Farbe weiß. Maße (B x H x T): 28 cm x 38 cm x 13 cm
Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Spezialschlüssel.

Aktionspaket:
1x Omni-Z Wandspender mit 1x Karton à 3.750 Blatt Einmal-Falhandtücher weiß

EUR 23,90
(Wandspender)

Art.-Nr. 442193 Wandspender Stück
Art.-Nr. 727493 Aktionspaket

EUR 43,90
(Aktionspaket)



Omni-Sensorspender

Sensorspendersystem für Papierrollen inklusive Wandhalterung. Netzunabhängige Stromversorgung durch Batterien (im Lieferumfang enthalten). Maße (H x B x T): ca. 390 cm x 320 cm x 210 mm
Die für das Sensorspendersystem erhältlichen Nachfüllrollen sind aus 100 % Zellstoff, 2-lagig in TAD Papierqualität. Rollenbreite 20 cm.

Aktionspaket:
Rollenspender Sensor, 6 x 100-m-Rollen Tücher

EUR 109,90
(Einzelgerät)

Art.-Nr. 699629 Rollenspender Stück
Art.-Nr. 701387 Aktionspaket

EUR 119,90
(Aktionspaket)



Liftbox Desinfektionswanne

Desinfektionsbox für Instrumente und Abdrücke. Das Sieb-Tray wird beim Schließen des Deckels in die Desinfektionslösung abgesenkt. Tray mit schwenkbarem Griff für einfaches Handling, kein direkter Hautkontakt mit Desinfektionsmitteln, säurebeständiger Kunststoff.

Maße: B ca. 26 cm x H 8,5 cm x T 12 cm
Art.-Nr. 310959 Stück, Inhalt: ca. 1,5 l


EUR 21,30



Miramatic® Holder Plus

Stabiler Sicherheitsständer für Injektionsspritzen und Spülkanülen. Vermeidet Verletzungsgefahr durch Nadeln, die offen auf dem Schwebetisch liegen, Ein-Hand-Recapping verringert Verletzungsrisiko, Spritze steht senkrecht in eigener Schutzhülle, Feststellklemme hält Schutzhülle sicher fest. Edelstahl, ca. 220 g schwer.

Art.-Nr. 300485 Stück **EUR 35,60**

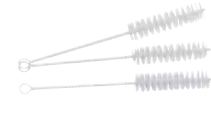

Mirasuc® Bürste

Reinigungsbürste für Absaugkanülen. Biegsam, ideal zur Innenreinigung der Kanülen. Für alle Absaugkanülen mit Ø 11 mm und Ø 16 mm.

Art.-Nr. 393166 Packung: 6 Stück

EUR 5,90



Klipp-Klapp-Siebzange für Kleinteile

Siebzange aus Edelstahl für Kleinteile wie Bohrer. Praktisch zum Einhängen in das Ultraschallbad, um empfindliche Kleinteile sicher abzubürsten. Siebe Ø 45 mm

Art.-Nr. 412767 Stück

EUR 4,90



BD-Steribox Bohrerbad Desinfektion

Behälter für die Desinfektion. Praktisch für Kleinteile wie Bohrer, Diamanten, mit Öffnung im Deckel, herausnehmbarem Sieb zum Abspülen des Inhalts. Autoklavierbar. Maße: Gesamthöhe ca. 12 cm, Ø ca. 8 cm Kunststoff, Farbe weiß

Art.-Nr. 390227 Stück

EUR 5,95


Angebote gültig bis 30.06.2019 oder solange Vorrat reicht. Preise verstehen sich rein netto ohne Abzug und sind nicht bonusfähig. Zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dental bauer GmbH & Co. KG (AGB), welche im Internet jederzeit unter www.dentalbauer.de eingesehen werden können. Alle Abbildungen nur symbolisch. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.



HYGIENE-AUSRÜSTUNG

schülke →

Praxishygiene
von Anfang an:
Eingangs-
desinfektion

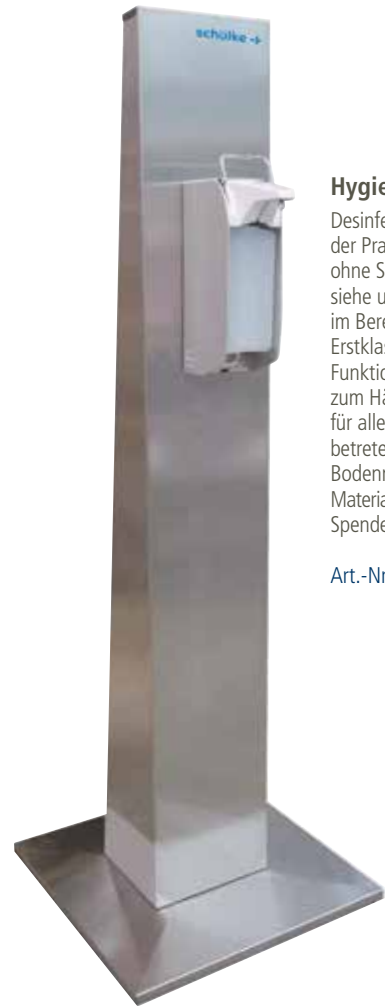

Hygiene-Desinfektionssäule

Desinfektionssäule für den Eingangsbereich der Praxis für Spender Typ KH touchless ohne Schalenhalter, Beschreibung zum Spender siehe unten. Die praxisorientierte Lösung im Bereich flexibler Desinfektionssäulen. Erstklassige, robuste Qualität und bewährte Funktionalität, die einen einfachen Zugang zum Händedesinfektionsmittel ermöglicht – für alle Personen die Ihre Praxisräume betreten.
Bodenmaß: 40 cm x 40 cm, Höhe: ca. 150 cm
Material: Edelstahl geschliffen, Gewicht: 30 kg.
Spender bitte separat bestellen.

Art.-Nr. 706602 Desinfektionssäule

EUR
379,00



Spender Typ KH touchless

Für die berührungslose Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen für 1.000 ml Einwegflaschen. Dosierte die benötigten Präparate über einen Dosierblock an der Dosierpumpe in Mengen von ca. 0,75 ml bis 1,5 ml je Hub. Die austauschbare Pumpe aus Edelstahl sichert störungsfreien Präparatfluss, kein Verstopfen, Verkleben oder Nachtropfen. Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium und Armhebel aus Edelstahl. Manuelle Bedienung durch Notbügel bei Batterieerleerung, niedriger Energieverbrauch ermöglicht eine lange Batterielaufzeit (bis zu 2 Jahre)
Maße (B x T x H): 9,2 cm x 21,0 cm x 29,0 cm

Art.-Nr. 425386 Spender
Art.-Nr. 706605 Schalenhalter

EUR
195,00
(Spender)

EUR
39,50
(Schalenhalter)



hyclick® Spender System

Flaschen mit integrierter Pumpe. Pumpsystem und Auslaufventil sind aufeinander abgestimmt und berücksichtigen die unterschiedlichen Viskositäten der Präparate.
– Click-System für den einfachen, schnellen Flaschenwechsel somit weniger Aufwand, Aufbereitung des Spendersystems entfällt
– Erstöffnungs- und Transportsicherung für schnelle Unterscheidbarkeit und mehr Sicherheit
– „Non-Removal“ Schraubverschluss verhindert die Wiederverwendung der Pumpe
– Flasche und Pumpe sind fest verbunden, das bietet maximalen Kontaminationsschutz
– Minimaler Reinigungsaufwand dank abgerundetem Design
– Verstellbarer Dosierhub: ca. 1,5 + 3 ml
– Einfache Montage auf gängigen Wandhalterplatten
– für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln und Waschlotion für 500 ml oder 1000 ml hyclick®-Flaschen
– Erfüllt die DGKH/RKI Empfehlungen

Art.-Nr. 724850 Spender für 1 Liter/Stück

EUR
20,90
(Spender)

INFRATRONIC
SOLUTIONS
we think globally



Sensor-Spender IT 1000 AW EURO

Berührungsloser, sensorgesteuerter Spender zur Ausgabe von Desinfektionsmittel, Seifen und dünnflüssigen Cremes von nahezu jedem beliebigen Hersteller für EURO-Flaschen bis 1 Liter Bindegröße. Abmessung (B x H x T): 112 mm x 353 mm x 116 mm.
IT 1000 AW EURO Material Kunststoff weiß/matt. Darstellung mit Sichtfenster zur Inhaltserkennung (ohne Acryl-Scheibe, separat bestellbar).
Stück, inklusive Flaschenadapter, Universal-Dosierpumpe, Batterie-Set

Art.-Nr. 685472 Stück

EUR
186,70

HYGIENE-AUSRÜSTUNG

B BRAUN
SHARING EXPERTISE



Mediboxen Kanülensammler & Abfallentsorgung

Medibox Kanülensammler zur sicheren Entsorgung von spitzen, scharfen und kontaminierten medizinischen Instrumenten.
– Bruchbeständig, durchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß der Vorgaben der DIN EN ISO 23907
– Für die Entsorgung von Kanülen mit Luer- oder Luer-Lock-Ansatz und Penkanülen
– Die Medibox® 0,7 L verfügt über Halterungen von Penkanülen-Schutzkappen
– Große Öffnung für die Entsorgung verschiedener scharfer und spritzer medizinischer Instrumente
– Kennzeichnung des maximalen Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box
– Temporär und endverschießbar
– Frei haltender Deckel durch leichtes Einrasten in offener Position
– Behälter und Deckel aus Polypropylen
– Autoklavierbar bei 134 °C für bis zu 18 Minuten (gilt nicht für die Medibox® 0,7 Liter)
– Zertifiziert nach ADR2015, 2008/68/EC und ISO 23907 (gilt nicht für die Medibox® 0,7 Liter)
– Erfüllt die Anforderungen an Abfallbehältnisse gemäß TRBA 250

Art.-Nr. 324296 Karton mit 10 Stück à 0,7 Liter
Art.-Nr. 753518 Stück à 2,4 Liter
Art.-Nr. 753519 Stück à 4,7 Liter

EUR
18,90
(Karton)

EUR
2,20
(Stück à 2,4 Ltr.)

EUR
3,10
(Stück à 4,7 Ltr.)



Wandspender Plus ELS, langer Arm

– mit Armhebelbedienung
– Aluminiumgehäuse, autoklavierbar
– Kunststoffpumpe
– leichte und schnelle Pumpenreinigung durch Frontentnahme möglich
– inklusive flexibler Dichtungskappe gegen Verdunstung
– einstellbare Dosierung ca. 1,5 ml / 1 ml / 0,7 ml in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes
– zusätzlich zwei austauschbare Clips (Desinfektion / Waschlotion)
– die neue Generation Wandspender plus ist auch geeignet für die Förderung von Pflegelotionen

Art.-Nr. 600498 Stück: 500 ml
Art.-Nr. 600497 Stück: 1000 ml

EUR
50,90
(500 ml)

EUR
50,90
(1000 ml)

SARSTEDT

Kanülensammler: nach TRBA und UN3291 geprüfter Sicherheitsbehälter für die einfache Entsorgung gebrauchter Kanülen. Universale Abzieh/-Abdrehvorrichtung für alle gängigen Kanülentypen. Nach DIN ISO 23907 zertifiziert.

Multi-Safe twin Box

	Art.-Nr.	
Multi-Safe opti 500 T Box 500 ml Volumen, Stück	301975	EUR 1,30
Multi-Safe twin Box 700 ml Volumen, Stück	318895	EUR 1,40
Multi-Safe twin Box 1,8 Liter Volumen, Stück	318911	EUR 1,50
Multi-Safe twin Box 2,1 Liter Volumen, Stück	318917	EUR 1,60
Multi-Safe twin Box 3 Liter Volumen, Stück	303541	EUR 2,90
Multi-Safe twin Box 5 Liter Volumen, Stück	303563	EUR 3,90



ECOLAB®

Eltra® 40 Desinfektionsvollwaschmittel

– Desinfektionsvollwaschmittel bei 40 °C
– gelistet für die chemothermische Wäsche-desinfektion bei 40 °C gemäß RKI und VAH
– hervorragende Waschleistung und Fleckentfernung bei 40 °C
– gibt der Wäsche einen hygienisch frischen Duft
– wäscht, desinfiziert und entfernt Flecken faserschonend
– wirksam gegen alle Viren, Bakterien und Pilze einschließlich MRSA, Tuberkuloseerreger, HIV, Hepatitis Noro-Rotavirus, Grippeerreger, SARS

Art.-Nr. 733640 Packung: 8,3 kg

EUR
73,40
(Packung 8,3 kg)



Eltra® 60 Desinfektionsvollwaschmittel

– Desinfektionsvollwaschmittel bei 60 °C
– gelistet für die chemothermische Wäsche-desinfektion bei 60/70/80 °C gemäß RKI (AB) und VAH
– zum Waschen und Desinfizieren von hygiene-sensiblen Textilien
– hervorragende Waschkraft bereits bei 60 °C
– wirksam gegen alle Viren, Bakterien und Pilze einschließlich MRSA, HIV, Hepatitis, Norovirus und andere Erreger viraler Durchfall-erkrankungen
– wäscht, bleicht und desinfiziert zugleich, entfernt Flecken faserschonend
– gegen Eiweiß- und Stärkeverschmutzungen biologisch wirksam

Art.-Nr. 302763 Karton: 6 kg
Art.-Nr. 358766 Sack: 20 kg

EUR
31,50
(Karton 6 kg)

EUR
97,90
(Sack 20 kg)



Angebote gültig bis 30.06.2019 oder solange Vorrat reicht. Preise verstehen sich rein netto ohne Abzug und sind nicht bonusfähig. Zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dental bauer GmbH & Co. KG (AGB), welche im Internet jederzeit unter www.dentalbauer.de eingesehen werden können. Alle Abbildungen nur symbolisch. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.

Hotline
00800
77655440
Bundesweit zum Nulltarif


www.
dentalbauer.de



HYGIENE-MATERIALIEN

AESCULAP

Instrumenten Ölspray
Aesculap Pflegeöl Sterilit

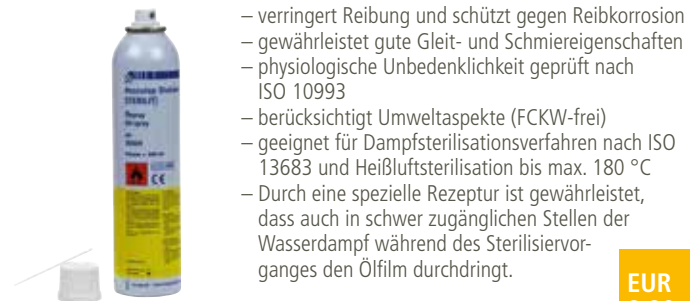

- verringert Reibung und schützt gegen Reibkorrosion
- gewährleistet gute Gleit- und Schmiereigenschaften
- physiologische Unbedenklichkeit geprüft nach ISO 10993
- berücksichtigt Umweltaspekte (FCKW-frei)
- geeignet für Dampfsterilisationsverfahren nach ISO 13683 und Heißluftsterilisation bis max. 180 °C
- Durch eine spezielle Rezeptur ist gewährleistet, dass auch in schwer zugänglichen Stellen der Wasserdampf während des Sterilisiervorganges den Ölfilm durchdringt.

Art.-Nr. 437569 Dose: 300 ml

EUR
8,90

Instrumenten Öl-Tropfenflasche
Aesculap Sterilit Pflegeöl



- Alle Sterilit-Pflegeöle sind für Dampfsterilisations-Verfahren validiert (nach EN 554/ISO 13683) und zur Heißluftsterilisation bis max. 180 °C geeignet. Sie werden vor der Sterilisation angewendet.
- verringert Reibung und schützt gegen Reibkorrosion
 - gewährleistet gute Gleit- und Schmiereigenschaften
 - physiologische Unbedenklichkeit geprüft nach ISO 10993
- Durch eine spezielle Rezeptur ist gewährleistet, dass auch in schwer zugänglichen Stellen der Wasserdampf während des Sterilisiervorganges den Ölfilm durchdringt.
- FCKW und silikonfrei, keine Flecken- und Krustenbildung auf Instrumentenoberflächen

Art.-Nr. 446729 Stück: 50 ml

EUR
5,90

schülke



mikroqid® universal wipes premium
mikroqid® universal wipes premium maxi

- Gering alkoholische Tücher zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Alkoholische Schnelldesinfektion in allen Bereichen und für wischbare Flächen aller Art mit erhöhtem Infektionsrisiko, den Erfordernissen kurzer Einwirkzeiten und guter Materialverträglichkeit angepasst, wie z. B.
- patientennahe Flächen, Behandlungseinheiten, Oberflächen medizinischer Geräte
 - Tastaturen und Bedienfelder empfindlicher Kommunikationsgeräte, z. B. Smartphones und Tablets
 - sehr gute Materialverträglichkeit (z.B. Tablets), exzellente Reinigungsleistung
 - wirksam nach EN 16615 (4-Felder-Test) in einer Minute
 - dermatologisch getestet, ohne Farb- und Parfümstoffe
 - schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sekunden)

Art.-Nr. 723218 mikroqid® universal wipes premium
(100 Tücher 20 x 20 cm) Reichweite: ca. 1,0 m²
Art.-Nr. 737145 mikroqid® universal wipes premium maxi
(80 Tücher 25 x 25 cm) Reichweite*: ca. 1,5 m²

EUR
9,10
(100 Tücher)

EUR
9,90
(80 Tücher)

ALPRO
ALPRO MEDICAL GMBH



Sterifilter

- Zur Anwendung am Wasserhahn. Der Perlator ist durch den entsprechenden Adapter (Innen- oder Außengewinde) zu ersetzen.
- Einwegprodukt, bis zu 50 Tage Anwendungsdauer
 - Schutz für immungeschwächte oder immunsupprimierte Patienten vor wassergebundenen, pathogenen Keimen
 - schnelle und sichere Installation
 - Medizinprodukt Klasse I, sterilisiert
 - Bakterienrückhalt > 7 log pro cm²

Art.-Nr. 740637 2 Filter pro Karton

EUR
198,00

Zubehör:
Innengewinde M22 IG
Art.-Nr. 741795

Außengewinde M24 AG
Art.-Nr. 754254

EUR
59,00
(je Gewinde)



Alprojet MixCup

- Multifunktionsbehälter zur Reinigung und Pflege der Absauganlage. Anmisch-, Absaug- und Ausgießbehälter in einem. Absaugansätze geeignet für alle Schlauchsysteme. Optimierte Gestaltung der Ansaugstutzen. Sorgt für einen größeren Flüssigkeitsdurchsatz und eine stärkere Reinigungswirkung. Einfach in der Handhabung. Sicherer Stand auch bei Belastung.

Art.-Nr. 337538

EUR
29,50

ALPRO
ALPRO MEDICAL GMBH



SteriCleaner

- SteriCleaner ist eine gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung der Sterilisationskammer, von Instrumententablets und Stahloberflächen. SteriCleaner entfernt selbst festsitzende Rückstände ohne große Probleme aus der Sterilisationskammer und von den Instrumenten und Trays äußerst materialschonend.

Art.-Nr. 412594 Flasche: 500 ml

EUR
11,90



IC 100

- Gebrauchsfertiger Reinigungsschaum, besonders materialverträglich, zur intensiven nicht proteinfixierenden Vorreinigung von Instrumenten. Löst Proteinrückstände, Gewebe und andere Körperflüssigkeiten von Oberflächen der Instrumente. Verhindert Korrosion an Stahl und Edelstahl. Verhindert das Antrocknen von Rückständen durch Feuchthalten der Instrumente, optimal bei Trockenlagerung von Instrumenten.

Art.-Nr. 627295 Flasche: 500 ml

EUR
16,50



Alprozyme – Alkalisch-enzymatisches Reinigungsgranulat

- zur Vorreinigung und Vordesinfektion für die Aufbereitung von zahnärztlichen Instrumenten und rotierenden Präzisionsinstrumenten. Verwendbar im Tauchbadverfahren sowie in Ultraschall-, Reinigungs-, Desinfektionsgeräten.

- Entfernt kraftvoll und materialschonend Proteine, Geweberückstände, Biofilm etc. von Oberflächen der Instrumente.
- Getestet nach ISO/TC 198/WG 13 Kap.6.2
- Hoher Personalschutz (TRBA 250), viruzid nach DVV „high level“ gegen unbehüllte Adeno-, Noro- und Parvoviren sowie behüllte Viren wie HBV, HCV, HIV, Influenza bei 1%iger Anwendung, vor der umfassenden Desinfektion
- Alprozyme ist ein Granulat und wird erst durch das Ansetzen mit warmem Wasser aktiv.
- Es hat eine herausragende Materialverträglichkeit, greift keine Instrumente an und kann somit über Nacht verwendet werden. Gerade bei der Verwendung von einem RDG ist dies von Vorteil um die Instrumente einzulegen wenn am Abend der RDG nicht mehr gestartet wird.

Art.-Nr. 303647 Klinikpackung: 100 Beutel a. 10 g

EUR
62,90



Alprojet-D

- Hochwirksames aldehydfreies, nicht schäumendes Flüssigkonzentrat für die tägliche Reinigung, Desinfektion und Pflege von zahnärztlichen Absaug- und Abscheideanlagen. Wirkt bakterizid, levurozid und viruzid (HCV, BVDV). Frei von Phenolen, Aldehyden, Phosphaten und Chlor! Sehr gute Materialverträglichkeit. Anwendung: 5%ig. Biologisch abbaubar (gemäß OECD-Richtlinien), VAH zertifiziert.

Art.-Nr. 306557 Dosierflasche: 1 Liter
Art.-Nr. 381254 Kanister: 10 Liter

EUR
9,70
(Flasche 1 l)

EUR
48,90
(Kanister 10 l)



Alprojet-DD

- Hochkonzentriertes aldehyd- und phenolfreies Flüssigkonzentrat für die tägliche Reinigung, Pflege und Desinfektion aller zahnärztlichen Absaug- und Abscheideanlagen. Quartäre Ammoniumverbindungen. Einwirkzeit 5 Minuten, VAH zertifiziert.

Art.-Nr. 627296 Dosierflasche: 1 Liter
Art.-Nr. 340085 Kanister: 5 Liter

EUR
14,50
(Flasche 1 l)

EUR
69,90
(Kanister 5 l)



Alprojet-W

- Hochwirksames aldehydfreies, nicht schäumendes Flüssigkonzentrat für die wöchentliche Kontrareinigung und Pflege von zahnärztlichen Absaug- und Abscheideanlagen. Sehr gute Materialverträglichkeit. Wirkt reinigend und in Kombination mit Alprojet-D desinfizierend. Quartäre Ammoniumverbindungen.

Art.-Nr. 306565 Dosierflasche: 1 Liter
Art.-Nr. 381238 Kanister: 5 Liter

EUR
9,70
(Flasche 1 l)

EUR
28,90
(Kanister 5 l)

Angebote gültig bis 30.06.2019 oder solange Vorrat reicht. Preise verstehen sich rein netto ohne Abzug und sind nicht bonusfähig. Zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dental bauer GmbH & Co. KG (AGB), welche im Internet jederzeit unter www.dentalbauer.de eingesehen werden können. Alle Abbildungen nur symbolisch. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.



HYGIENE-MATERIALIEN



Omnident T-Ölspray

T-Ölspray zur Pflege von Sirona Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen, Köpfen und Spannzange

Art.-Nr. 430185 Dose: 250 ml

EUR
13,70



Omnident Universal Ölspray

Universal-Ölspray zur Pflege von Hand- und Winkelstücken, Köpfen, Spannzangen und Turbinen sowie Luftmotoren

Art.-Nr. 429876 Dose: 500 ml

EUR
11,80



Omni Edelstahlpflegespray

Das Edelstahlpflegespray wurde speziell für Reinigung, Pflege und Schutz von matten und polierten Edelstahlflächen im Innen- und Außenbereich entwickelt. Wirkt antistatisch. Entfernt und verhindert Fingerabdrücke, reinigt streifenfrei auch größere Flächen und hinterlässt einen lang anhaftenden Schutzfilm, der Wasser abperlen lässt. So verhindert Omni Edelstahlpflegespray das erneute Anhaften von Schmutz.

Art.-Nr. 357526 Dose: 400 ml

EUR
8,10



Omidrill

Bohrerbad, hervorragend geeignet zur Desinfektion und Reinigung von rotierenden Dentalinstrumenten, inkl. Wurzelkanalinstrumente, Gummipolierer und keramischen Schleifkörpern. Ausgezeichnete Reinigungskraft und Korrosionsschutz. Aldehyd- und phenolfrei. VAH/DGHM-gelistet. Ultraschallbad-geeignet. Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid (Candida albicans), tuberkulozid, wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe). Einwirkzeiten nach VAH/DGHM: Konz.: 15 Minuten inkl. HBV/HIV/HCV. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

Art.-Nr. 346947 Flasche: 2 Liter
Art.-Nr. 346810 Kanister: 10 Liter

EUR
8,90
(Flasche 2 l)

EUR
38,50
(Kanister 10 l)



Ultra Orange

Reiniger für Praxis und Labor. Mischung aus natürlichen schalengepressten Orangenölen. Hohe Reinigungskraft und angenehm duftend. Spezialreiniger zur Entfernung von Zement, Alginat- und Gipsresten auf Abdrucklöffeln, Anmischbesteck, Glasplatten, Keramik und Kronen/Brücken.

Art.-Nr. 320714 Flasche: 250 ml

EUR
4,90



Adapter Winkelstück-Turbinenköpfe

Adapter Winkelstück-Turbinenköpfe ISO 9168, für Universal-Ölspray und T-Ölspray

Art.-Nr. 430601 Stück

EUR
1,60



Omnifol Sterilisationsfolien

Einmal-Sterilisationsfolien. Getönt Klarsichtverbundfolie aus einer Papier-Folien-Kombination. Für die Dampf- und Gassterilisation mit Indikator. Spezialpapier, einrissfeste Folie, vollkommen peelbar, nahezu faserfreie Ablösung.

EUR
48,90
(Omnifol 200)

Art.-Nr. 385973 Rolle 200 mm x 55 mm x 100 mm (für Trays)

EUR
16,30
(Omnifol 50)

Art.-Nr. 348811 Rolle 50 mm x 200 mm

EUR
18,70
(Omnifol 75)

Art.-Nr. 348818 Rolle 75 mm x 200 mm

EUR
24,50
(Omnifol 100)

Art.-Nr. 348833 Rolle 100 mm x 200 mm



Omniwipes wet fleur

Fertig getränkte Premiumtücher zur Wischdesinfektion. Omniwipes wet fleur macht umständliche Dosier- und Befüllungsarbeiten überflüssig. Damit ist neben dem Vorteil der Zeitersparnis eine hohe Desinfektionssicherheit (keine Unter- oder Überdosierung) gegeben. Die hochwertigen Omniwipes SuperSoft-Tücher im Format 28 cm x 30 cm sind fusselfrei, sehr weich und reißfest. Qualität 50 g/qm, 100 % PES. Jede Tücherpackung à 90 Blatt ist mit je 2,25 l Omnidrill Fleur fertig getränkt. Einfach den Standbeutel aufschneiden und in den passenden Spendereimer stellen. Den Eimerdeckel, Reservoir und Tücherabrissperforation mit einem Desinfektionstuch vor dem Verschließen desinfizieren. Die Kompatibilität von Tuchmaterial und der Tränkflüssigkeit Omnidrill Fleur ist gutachterlich bestätigt.

Art.-Nr. 652295 Beutel: 90 Tücher
Art.-Nr. 691407 Leereimer

EUR
16,90
(Beutel)

EUR
4,90
(Leereimer)

HYGIENE-MATERIALIEN



Omnisept IMP

Gebrauchsfertige Lösung zur Tauchdesinfektion und Reinigung von Abformungen. Omnisept IMP beeinflusst die Oberflächenqualität und das Dimensionsverhalten der Materialien nicht und verhält sich farbneutral. Omnisept IMP ist aldehyd- und phenolfrei und eignet sich zur Desinfektion von zahnmedizinischen Werkstücken und Prothetikmaterial aus Polyether, A/C-Silikonen, Alginaten und Hydrokolloiden. Für Ultraschallbad geeignet. Urtäre Ammoniumverbindungen. Einwirkzeit 5 Minuten.

Art.-Nr. 381976 Kanister: 10 Liter

EUR
65,30



Omnisept Plus

Omnisept Plus – die neue Generation im Bereich der Reinigungs- und Desinfektionsmittel für das gesamte (chirurgische) Instrumentarium in der Zahnarztpraxis. Geeignet für die Verwendung im Ultraschallbad. Verbesserte Materialverträglichkeit, gutes Korrosionsverhalten durch das Fehlen von Chloriden und niedrigere alkalische Einstellung (pH 11). Erfüllt die Anforderungen an die vollständige Viruzidie.

Art.-Nr. 482152 Dosierflasche: 1 Liter
Art.-Nr. 482094 Kanister: 10 Liter

EUR
13,70
(Flasche 1 l)

EUR
89,70
(Kanister 10 l)



Omni Tray Cleaner Konzentrat

Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxyc-Eugenol-, Carboxylat-, Phosphat-, Glasionomer-Zemente sowie thermoplastische Abformmassen und Wachse. Anwendung als 5 bis-10%ige Lösung, bei sehr starker Verschmutzung auch pur. Auch im Ultraschallbad verwendbar. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

Art.-Nr. 344560 Flasche: 1 Liter
Art.-Nr. 344564 Kanister: 5 Liter

EUR
12,90
(Flasche 1 l)

EUR
56,40
(Kanister 5 l)

Vollviruzid,
alkoholfrei
und
aldehydfrei!



OmniBiozid PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Besonders geeignet ist die Lösung für die terminale Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Intraoralkameras. Tuberkulozid und VIRUZID. Bakterien nach EN13727 und EN13697 (hohe Belastung) und levurozid Konzentration 1 Minute. Sehr gut materialverträglich (nicht empfohlen zur Anwendung auf Acrylglas/Polycarbonat).

Art.-Nr. 745468 Sprühflasche: 500 ml
Art.-Nr. 745469 Kanister: 10 Liter

EUR
8,49
(500 ml)

EUR
47,90
(Kanister 10 l)



Omnipur

Aldehyd- und phenolfreie Flächendesinfektion. Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar gemäß Medizinproduktegesetz wie z. B. Praxiseinheiten sowie von Flächen aller Art wie Fußböden. Besonders geeignet für Bereiche, in denen eine Geruchsbelastung vermieden werden muss. Biologisch abbaubar, mit guter Reinigungskraft, mit Zitrusduft. VAH/DGHM-gelistet.

Art.-Nr. 459054 Dosierflasche: 1 Liter
Art.-Nr. 474820 Kanister: 10 Liter

EUR
10,50
(Flasche 1 l)

EUR
56,90
(Kanister 10 l)

Vollviruzid,
alkoholfrei
und
aldehydfrei!



Omniwipes wet & easy PLUS

Gebrauchsfertige, vorgetränkte feste und praktische Tücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Besonders geeignet sind die Tücher für die terminale Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Intraoralkameras. Tuberkulozid und vollviruzid. Sehr gut materialverträglich (nicht empfohlen zur Anwendung auf Acrylglas/Polycarbonat). Bakterien (E. hirae., P. aeruginosa, S. aureus, E. coli) und Candida albicans nach VAH und EN16615 (hohe Belastung). Konzentration 2 Minuten. Flache Packung zum verstauen in schmalen Schubladen.

Art.-Nr. 745474 Packung: 2x 15 Tücher

EUR
6,50



Omniwipes neutral

Feuchttücher zur schnellen Reinigung und Desinfektion im dental-medizinischen Bereich von kleinen Flächen, Behandlungseinheiten und Arbeitstischen in Zahnarztpraxen. Aldehydfrei. Tränkflüssigkeit ist VAH/DGHM-gelistet.

Art.-Nr. 339113 Beutel: 100 Feuchttücher
Art.-Nr. 339217 Leerdose

EUR
2,70
(Beutel)

EUR
2,10
(Leerdose)



Saliva Nanosept

Nachhaltige und hochwirksame Mundspülbecken-Desinfektion und -Reinigung. In der Foamer-Flasche für wirkoptimierten Desinfektions- und Reinigungsschaum.

Art.-Nr. 308698 Foamer-Flasche: 400 ml

EUR
9,70



Salivasept

Spezialpräparat zur Reinigung und Pflege von Mundspülbecken in zahnärztlichen Behandlungseinheiten. Es kann ebenfalls zur Reinigung von Waschbecken, WC, Fliesen etc. verwendet werden. Mundspülbeckenreiner Salivasept entfernt zuverlässig Ablagerungen von Kalk, Blut und Farbstoffreste von Plaque-Tabletten.

Art.-Nr. 455494 Flasche: 750 ml

EUR
6,90

Angebote gültig bis 30.06.2019 oder solange Vorrat reicht. Preise verstehen sich rein netto ohne Abzug und sind nicht bonusfähig. Zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dental bauer GmbH & Co. KG (AGB), welche im Internet jederzeit unter www.dentalbauer.de eingesehen werden können. Alle Abbildungen nur symbolisch. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.

Hotline
00800
77655440

bundesweit zum Nulltarif

www.
dentalbauer.de

HYGIENE-MATERIALIEN



MD 520

Formaldehydfreie Gebrauchslösung zur Desinfektion und Reinigung von Abformungen, prothetischen Arbeiten, korrosionsfesten Artikulatoren etc. Erhöhte Präzision des Meistermodells aus Gips durch hervorragende Reinigungswirkung. Anwendbar u. a. für Alginate, Silikone, Polyethergummi, Hydrokolloide, Polysulfide. Keine Beeinträchtigung der Dimensionsstabilität oder Gipskompatibilität.

- Einwirkzeit: 5 Minuten im Tauchbad, 10 Minuten im Hygojet. VAH/DGHM-gelistet.
- Wirkungsspektrum: bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid (behüllte Viren wie Vaccinia-Viren inkl. HBV, HCV und HIV sowie gegen unbehüllte Viren wie Adeno-Viren, Noro-Viren).
- Wirkstoffbasis: Aldehyde und quartäre Ammoniumverbindungen.
- Einwirkzeit 5 Minuten.



EUR
28,60
(Flasche 2,5 l)

EUR
104,00
(Kanister 10 l)

Art.-Nr. 376520 Flasche: 2,5 Liter
Art.-Nr. 386805 Kanister: 10 Liter



Orotol® plus

Aldehyd- und schaumfreies Konzentrat für die gleichzeitige Desinfektion, Desodorierung, Reinigung und Pflege aller zahnärztlichen Sauganlagen und Amalgamabscheider. Intensive Reinigungskraft, beseitigt auch hartnäckige Ablagerungen. Quartäre Ammoniumverbindungen. Einwirkzeit 5 Minuten.

Art.-Nr. 459801 Basis-Set: 2,5 l Orotol plus
2,5 l MD 555 cleaner
800 ml MD 550, Orocup
Art.-Nr. 354417 Flasche: 2,5 Liter

EUR
87,50
(Basisset)

EUR
37,60
(Flasche 2,5 l)



MD 555 cleaner

Schaumfreier Spezialreiniger mit verbesserter Rezeptur für Sauganlagen und Amalgamabscheider aller Art. Die regelmäßige Anwendung von MD 555 cleaner beugt einer Belagsbildung in der Sauganlage vor. Verstopfungen in der Sauganlage durch den Einsatz von schwerlöslichen Prophylaxe-Produkten, wie Prophylaxepulvern oder Pearlprodukten, speziell auf Basis von Calciumcarbonaten, werden vermieden und bereits vorhandene Ablagerungen aufgelöst. Intensivste Reinigungswirkung gegen Ablagerungen und Verschlammungen. Geprüfte Materialverträglichkeit – von führenden Einheitenherstellern empfohlen. Ideal in Kombination mit Orotol plus oder Orotol ultra.

Art.-Nr. 700492 Flasche: 2,5 Liter

EUR
25,60



neodisher® PreStop

Sprühschaum zum Aufsprühen auf kontaminierte Instrumente direkt nach der Anwendung. Korrosionsschutzmittel verhindert Lochkorrosion auf Edelstahlinstrumenten, die durch anhaftende Rückstände physiologischer Kochsalzlösung entsteht. Hemmt das Wachstum von Mikroorganismen auf dem Instrumentarium während der Kontaktzeit (bakteriostatisch). Geeignet besonders für chirurgische Instrumente inklusive MIC-Instrumente. Das Abspülen der Instrumente ist vor der Aufbereitung in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG / TDI) nicht erforderlich. **Verhindert das Antrocknen von Rückständen durch Feuchthalten der Instrumente, optimal bei Trockenlagerung von Instrumenten.**



Für die
Trockenlagerung
der
Instrumente!

Art.-Nr. 725975 Flasche: 0,75 Liter

EUR
19,90



neodisher® MediClean Dental

Mildalkalischer, enzymatischer Reiniger – Flüssigkonzentrat – entfernt wirkungsvoll Blut- und Eiweißrückstände. Besonders materialschonend. Auch zur maschinellen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten geeignet. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.

Art.-Nr. 455733 Kanister: 5 Liter

EUR
37,50



neodisher® Z Dental

Neutralisationsmittel – Flüssigkonzentrat – auf Basis organischer Säuren. Frei von Tensiden und Phosphaten. Neutralisiert verschlepte Alkalireste bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten. Auch für die maschinelle Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten geeignet. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.

Art.-Nr. 417816 Flasche: 1 Liter
Art.-Nr. 480032 Kanister: 5 Liter

EUR
8,90
(Flasche 1,0 l)

EUR
38,70
(Kanister 5 l)



neodisher® MediKlar Dental

Nachspülmittel – Flüssigkonzentrat – mit speziellen Benetzungskomponenten für eine verbesserte Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten inkl. Übertragungsinstrumenten und zahnärztlichen Utensilien. Auch für schwer benetzbare Materialien wie z.B. Kunststoffe bestens geeignet. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.

Art.-Nr. 342598 Flasche: 1 Liter
Art.-Nr. 747324 Flasche: 0,95 Liter*

EUR
9,90
(Flasche 1,0 l)

EUR
10,90
(Flasche 0,95 l)

*Kein Umfüllen mehr nötig – direkt in Ihren MELAtherm RDG einsetzbar.

HYGIENE-MATERIALIEN



Profi-Reinigungstücher für Oberflächen, Sonderreinigung, Sanitär!

EVO® GT Mikrofaser-Profitücher

Hochwertige Microfaser-Profitücher, für alle Oberflächen. Streifen- und fussfreie Reinheit, sehr gut geeignet um Instrumente zu trocknen nach manueller Reinigung & Desinfektion oder aus Thermodesinfektoren ohne aktive Trocknung. Geeignet auch für die Reinigung der Kammern der Aufbereitungs-Geräte wie Sirona DAC, RDG, Sterilisator und Ultraschallgerät. Durch die besondere Oberflächenstruktur werden selbst schwierigste Schmutzpartikel vollständig aufgenommen. Abriebfreie Qualität da kein Sandwichaufbau. Kein Abmehlen. Mehrwegtücher extrem lange haltbar. Die Farbcodierung und die aufgedruckten Anwenderpiktogramme garantieren die sichere Zuordnung zu den Einsatzbereichen. Saugt Flüssigkeiten vollständig auf. Weicher, textiler Griff und exzellentes Gleitverhalten. Reinigungsmittelbeständig und Maschinenwaschbar bis 60 °C. Größe 40 cm x 40 cm

Art.-Nr. 370756 Packung: 10 Stück, **Oberflächen, blau**
Art.-Nr. 370772 Packung: 10 Stück, **Sonderreinigung, z.B. Instrumente, grün**
Art.-Nr. 370790 Packung: 10 Stück, **Sanitär, gelb**

EUR
31,90



Reinigungsbürste mit extra harten Kunststoffborsten

Reinigungsbürste für hartnäckige Verschmutzungen.
– hitzebeständig bis 134 °C
– Borstenhärte: extra hart
– Farbe blau

– Bürstenkopflänge: 30 mm und 45 mm
– Borstenlänge: 12 mm
– Gesamtlänge: 165 mm
– thermodesinfizierbar

Art.-Nr. 725861 Packung: 10 Stück

EUR
29,90

Noch mehr Spaß beim Einkaufen:

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter www.dentalbauer.de

Bestellformular ausfüllen, faxen oder telefonieren ist Ihnen zu aufwendig? Kein Problem! Für Sie haben wir auf unserer Website www.dentalbauer.de einen Online-Shop eingerichtet, auf dem Sie mit wenigen Klicks unser gesamtes Warensortiment bestellen können – **unkompliziert, schnell und sicher dank SSL-Zertifikat.**

- Profitieren Sie von unseren ständig wechselnden, attraktiven Aktionen.
- Alle Bestellungen an Werktagen bis 16 Uhr werden am gleichen Tag an unseren Versand weitergeleitet.
- Der Retourversand von Verbrauchsmaterialien ist kostenlos.



Hotline
00800
77655440

bundesweit zum Nulltarif

www.dentalbauer.de

Angebote gültig bis 30.06.2019 oder solange Vorrat reicht. Preise verstehen sich rein netto ohne Abzug und sind nicht bonusfähig. Zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dental bauer GmbH & Co. KG (AGB), welche im Internet jederzeit unter www.dentalbauer.de eingesehen werden können. Alle Abbildungen nur symbolisch. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.



INSTRUMENTE & ZUBEHÖR

LOSER & CO
after mal was Gutes...



Mundspiegel Zirc Crystall Nr. 4

40 % heller als Standard Rhodium-Spiegel. Schattenfreie, farbgenaue Wiedergabe, kratzfester als Rhodiumgläser, autoklavierbar 136 °C, deutlich geringere Augenbelastung und -ermüdung, keinerlei Schmutzrand durch glatten, randlosen Übergang vom Spiegelglas in die Fassung. Farben NEON bunt gemischt.

Art.-Nr. 653642 Packung: 12 Stück

EUR
80,50



Mundspiegel Zirc Crystall-Soft-Gripp Nr. 4

40 % heller als Standard Rhodium-Spiegel. Schattenfreie, farbgenaue Wiedergabe, kratzfester als Rhodiumgläser, autoklavierbar 136 °C, deutlich geringere Augenbelastung und -ermüdung, keinerlei Schmutzrand durch glatten randlosen Übergang vom Spiegelglas in die Fassung. Farben NEON bunt gemischt mit Soft-Grip.

Art.-Nr. 700874 Packung: 12 Stück

EUR
80,50

Weitere
Farben
erhältlich



Zirc EZ-Jett Kassette für Instrumente

Die ideale Kassette für Instrumentensätze (PA, PZR, Untersuchung) oder ähnliche Instrumente. Seitliche Klappdeckel fixieren die Instrumente sicher im Tray. Die großzügige Aussparung am Boden des Trays ermöglicht die optimale Reinigung im Thermodesinfektor. Autoklavierbar. Farbe blau.

Art.-Nr. 376175 Kassette für 5 Instrumente
Art.-Nr. 661154 Kassette für 8 Instrumente

EUR
30,00
(5 Instrumente)

EUR
40,00
(8 Instrumente)

OMNI
DENT®
We care. You smile.



Omni Minibrush Polierbürstchen

Omni Minibrush mit Nylonborsten und Winkelstück-Schaft, ideal für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Drehzahlbereich: max. 5.000 U/min, Einmal-Produkt.

Art.-Nr. 309580 Packung: 100 Stück

EUR
42,90



Omni Minibrush soft Polierbürstchen

Omni Minibrush soft mit weichen Nylonborsten für Patienten mit empfindlichen Zahnhälsen. Speziell für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Mit Winkelstückschacht. Drehzahlbereich: max. 5.000 U/min, Einmal-Produkt.

Art.-Nr. 410337 Packung: 100 Stück

EUR
43,30



Instrumentenkappen Omni Tip Cover


Universelle Instrumenten-Schutzkappen aus flexiblem Kunststoff zur Vermeidung von Verletzungsrisiken und Schutz vor Beschädigung. Einfache Anwendung – zuverlässiger Schutz. Die beiden verfügbaren Größen decken alle gängigen Instrumentengrößen und -formen ab.

Art.-Nr. 707933 Größe 1: 2,5 mm x 28 mm,
Packung: 10 Kappen

Art.-Nr. 707934 Größe 2: 4 mm x 28 mm,
Packung: 10 Kappen

EUR
4,90

DÜRR
DENTAL

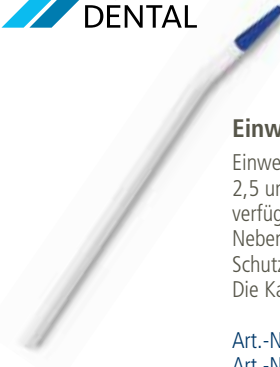

Einweg-Chirurgische Absaugkanülen

Einweg-Chirurgiekanülen mit einem Durchmesser von 2,5 und einer Kanülenlänge von ca. 17 cm. Die Kanüle verfügt über eine Spitze mit integrierten Protect-Nebenlufteinlässen. Diese bietet den bestmöglichen Schutz vor Reflux aus dem Saugsystem. Die Kanülen sind steril, einzeln verpackt.

Art.-Nr. 393146 Packung: 20 Stück
Art.-Nr. 422655 Packung: 100 Stück

EUR
19,50

EUR
82,60

INTRUMENTE & ZUBEHÖR

interlock



Instrumentenschutzkappen gelocht, rechteckig, klar

Die Einweg-Instrumentenschutzkappen werden nach der Reinigung und Desinfektion auf die Spitzen gesteckt. Sie können bei 134 °C sterilisiert werden. Die Kappen sind belüftet, d. h. sie besitzen Perforationen, damit Dampf oder Gas durchdringen kann. Größe 2 mm x 9 mm x 25 mm

Art.-Nr. 642663 Packung: 100 Stück

EUR
13,50



Instrumentenschutzkappen gelocht

Die Einweg-Instrumentenschutzkappen werden nach der Reinigung und Desinfektion auf die Spitzen gesteckt. Sie können bei 134 °C sterilisiert werden. Die Kappen sind belüftet, d. h. sie besitzen Perforationen, damit Dampf oder Gas durchdringen kann.

Art.-Nr. 701177 Packung: 70 Stück
blau Ø 3-4 mm

Art.-Nr. 704425 Packung: 70 Stück
grün Ø 4-5 mm

Art.-Nr. 701176 Packung: 70 Stück
gelb Ø 6-7 mm

EUR
26,90

COLTENE®

Roeko Surgitip Einmalkanülen

Die sterile chirurgische Einmalkanüle ermöglicht dank ihrer feinen Spitze optimales, sicheres Absaugen bei chirurgischen Eingriffen.

Art.-Nr. 467358 Packung: 100 Einmal-
kanülen Ø 2,5 mm
mit Spitzenaufsatz

EUR
118,50
(Ø 2,5 mm)

Art.-Nr. 467374 Packung: 100 Einmal-
kanülen Ø 4,8 mm
ohne Spitzenaufsatz

EUR
109,90
(Ø 4,8 mm)

Art.-Nr. 417985 Packung: 100 Einmal-
kanülen Ø 1,2 mm
micro

EUR
142,50
(Ø 1,2 mm)

HÄGER
WERKEN



Variator®-Kit sterile Einmalinstrumente

Steriles Einmalbehandlungsset, enthält Mundspiegel, Pinzette und Sonde. Großer Anmischspatel zum Mischen von Zement und Füllungsmaterialien, Kugelkopf und Heidemannspatel zum Stopfen. Praktisch bei Hausbesuchen, Risikopatienten und in Notfällen. Alle drei Instrumente sind Gamma-sterilisiert und zusammen blisterverpackt. Sicher und bequem – alles steril verpackt in einem Set.

Art.-Nr. 382880 Kit á 10 Sets

EUR
8,70

PATIENTENZUBEHÖR

OMNI
DENT®
We care. You smile.



Omni-Spender für die Einmal-Patientenumhänge

Spender für die Wand oder Tischablage. Farbe weiß.

Art.-Nr. 398100 Stück Tischspender
Art.-Nr. 318936 Stück Wandspender, mit
verstärkter Rückwand

EUR
14,50
(Tischspender)

EUR
16,30
(Wandspender)



Einmal-Patientenumhang

Aus dünner PE-Folie, mit saugfähiger Zellstoff-Auflage, mit Halsausschnitt und Bändern. Größe der Umhänge: 54 cm x 60 cm

Art.-Nr. 417909 Rolle: 80 Umhänge, weiß
Art.-Nr. 417926 Rolle: 80 Umhänge, hellblau
Art.-Nr. 318930 Rolle: 80 Umhänge, grün

EUR
9,90

Mundhöhlen-
Antisepsis vor
der Patientenbe-
handlung!



Omni OraCare

Antibakterielle und alkoholfreie Mundspüllösung für professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs. Für einen frischen Atem. 0,1 % Benzalkoniumchlorid, 0,05 % Natriumfluorid. Besonders geeignet für die Mundhöhlen-Antisepsis vor jeder Patientenbehandlung.

Art.-Nr. 691458 Flasche: 1 Liter

EUR
8,90



Kopfschutztaschen

Kopfschutztaschen mit jeweils einer Lage Zellstoff und PE-Folie mit praktischer Abreißperforation, zum Schutz vor Verunreinigung, Schweiß etc. Passend für alle gängigen Praxiseinheiten. Größe: 28 cm x 27 cm

Art.-Nr. 342170 Rolle: 100 Taschen,
hellblau
Art.-Nr. 342176 Rolle: 100 Taschen, weiß

EUR
6,90



Omni Bib Holder

Einweg-Serviettenhalter mit Klebeverschluss, größenflexibel, Farbe weiß.

Art.-Nr. 727450 Packung: 250 Stück

EUR
7,90

DUX
CENTAL



Bib-Eze – Einweg Patienten-Serviettenhalter

Hygienisches und unkompliziertes Anbringen durch zwei Klebestreifen. Nach Gebrauch gemeinsam mit der Serviette zu entsorgen. Tragekomfort durch weiches Krepp-Papier. One Size fits all. Bib-Eze bedeutet perfekte Sicherheit in der Hygienekette!

Art.-Nr. 463592 Packung: 250 Stück

EUR
11,10

Angebote gültig bis 30.06.2019 oder solange Vorrat reicht. Preise verstehen sich rein netto ohne Abzug und sind nicht bonusfähig. Zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dental bauer GmbH & Co. KG (AGB), welche im Internet jederzeit unter www.dentalbauer.de eingesehen werden können. Alle Abbildungen nur symbolisch. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.

Hotline
00800
77655440
bundesweit zum Nulltarif

www.
dentalbauer.de



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



BARRIER® OP-Mantel

Der Einmal-OP-Mantel wird aus Polypropylenfaser-Vlies – sogenanntem SMS-Vlies – hergestellt, das ausreichenden Schutz vor Flüssigkeiten bietet. Perfekt für die Aufbereitung von Instrumenten, unter der Arbeitsschutzschürze zu tragen sowie bei chirurgischen Eingriffen. Länge 127 cm, Größe L

Art.-Nr. 349999 Stück

EUR
3,10



Schutzmantel unsteril

Geeignet für Besucher (z. B. für externe Depotttechniker, Mitarbeiter vom Dentallabor, Validierer) im Aufbereitungsraum und hygienesensiblen Bereichen. Perfekt für die Aufbereitung von Instrumenten, unter der Arbeitsschutzschürze zu tragen. Länge: 124 cm. Farbe blau. Größe L.

Art.-Nr. 410268 Packung: 50 Stück

EUR
52,90

Als Schutz unter der Arbeitsschutzschürze zu tragen!



Guttasyn-Arbeitsschutzschürzen – mehr Sicherheit bei der Instrumentenaufbereitung

Arbeitsschutzschürze aus PVC-Spezialfolie mit vier eingeschweißten Kunststoffösen und Hals- und Hüftbändern, M3 0,3 mm ohne Gewebe, die Arbeits-Chemikalienschutzschürzen sind baumustergeprüft- und zertifiziert. PSA-Kategorie III, EN 14605:2005 + A1:2009 sowie EN 340:2003
Farbe blau
Größe 80 cm x 100 cm

Art.-Nr. 706599 Stück

EUR
14,50



Arbeitsschutzschürze – mehr Sicherheit bei der Instrumentenaufbereitung

Arbeitsschutzschürze aus PVC-Spezialfolie mit vier eingeschweißten Kunststoffösen und Hals- und Hüftbändern, M5 0,5 mm ohne Gewebe, die Arbeits-Chemikalienschutzschürzen sind baumustergeprüft- und zertifiziert. PSA-Kategorie III, EN 14605:2005 + A1:2009 sowie EN 340:2003
Farbe weiß
Größe 90 cm x 120 cm

Art.-Nr. 706600 Stück

EUR
16,50



Hitzeschutzhandschuh aus Silikon

Hitzehandschuh aus Silikon, RDG-tauglich, Universalgröße, Länge: 35 cm, Farbe hellblau, Einsatzbereich: -40 °C bis +240 °C, Oberfläche strukturiert, latexfrei.

-40 °C
bis
+240 °C

Art.-Nr. 706603 Stück

EUR
9,90



Nitril Schutzhandschuhe mit langer Stulpe

– persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie 3 für Reinigung und Desinfektion
– Schutz vor Verletzungen durch Stiche, Lösungsmittel und Chemikalien
– weiches Innenfutter, konturierte Griffflächen, latexfrei,
– persönliche Schutzausrüstung nach EN 374 + EN 388
– autoklavierbar bis 121° C, desinfizierbar, mehrfach verwendbar, Farbe lila

Art.-Nr. 374365 Packung:
1 Paar Größe 8 (M)

EUR
9,10



Lila Handschuhe – mehr Sicherheit bei der Instrumentenaufbereitung

Tun Sie etwas mehr für den Schutz Ihres Personals im Hygiene-Aufbereitungsprozess.
– Nitrilarbeitshandschuh mit Baumwollflockenfutter – ohne Latex
– ideal für den Umgang mit Chemikalien
– schützt bedingt gegen Durchbohren, Durchstoßen und vor Schnittverletzungen
– Handschuhschaft besitzt die erforderliche Länge
– griffige Struktur erlaubt rutschsicheres Halten aller Gegenstände, erhöht jedoch nicht das Tastgefühl
– desinfizierbar + autoklavierbar bis 121 °C (bis zu 5 mal)

Art.-Nr. 391143 Packung:
3 Paar Größe 7 (S)

Art.-Nr. 391211 Packung:
3 Paar Größe 8 (M)

Art.-Nr. 415539 Packung:
3 Paar Größe 9 (XL)

EUR
24,50

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



Peha-soft® nitrile Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem, blau gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei; durch die Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch, besonders reißfest und sicher; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen. Für alle Bereiche, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Geprüft nach folgenden Normen EN 455 Teil 1-4 (medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch), EN 374 Teil 1-3 (Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen), EN 420 (Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe), EN 388 (Kennzeichnung und Leistungsstufen von Schutzhandschuhen).

Packung: 100 Stück

Art.-Nr. 389180 Größe XS
Art.-Nr. 394688 Größe S
Art.-Nr. 402650 Größe M

EUR
8,90



Peha-soft® nitrile guard Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe mit langer Stulpe

Packung: 100 Stück

Art.-Nr. 707964 Größe XS
Art.-Nr. 349622 Größe S
Art.-Nr. 349628 Größe M

EUR
7,90



Mundschutz mit Gesichtsschild

OP-Mundschutz, 4-lagig und spritzdicht, weiches Innenvlies, mit Gesichtsschild, mit integriertem Anti-Beschlagsband, Farbe blau, zum Binden.

Art.-Nr. 371438 Packung: 50 Stück

EUR
46,90



Flexbrush Reinigungsbürste

Autoklavierbare Reinigungsbürste für die Hände, ideal zur Reinigung der Hände vor und nach der Behandlung. Extra lange, strapazierfähige Borsten auf der Unterseite, Kurzborsten an der Oberseite, autoklavierbar – erfüllt Hygieneauflagen. Länge: 9,5 cm

Art.-Nr. 428703 Stück

EUR
2,70



Latex Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe

Puderfreier Latex Einmal-Untersuchungs- und Chemikalienschutzhandschuhe geprüft nach folgenden Normen: EN 374 Teil 1-4 (Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen) und EN 455 Teil 1-4 (medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch) sowie PSA 89/686/EEC (Anforderungen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA)). Unsteril, mit Rollrand. AQL 1,5, Beidhändig verwendbar. Die hochwertige Polybeschichtung innen reduziert das Allergierisiko und erleichtert den Einstieg. Hohe Taktilität bei gleichzeitiger Griffbarkeit durch mikrogeraute Handfläche.

Packung: 100 Stück

Art.-Nr. 321913 Größe XS
Art.-Nr. 321919 Größe S
Art.-Nr. 321945 Größe M
Art.-Nr. 321951 Größe L
Art.-Nr. 321957 Größe XL

EUR
5,80



Überschuhe CPE für den Aufbereitungsraum

Geeignet für Besucher (z.B. für externe Depotttechniker, Mitarbeiter vom Dentallabor, Validierer) im Aufbereitungsraum und hygienesensiblen Bereichen. Farbe blau. Stärke: 35 my.

Art.-Nr. 337886 Beutel: 2.000 Stück



EUR
52,90

Angebote gültig bis 30.06.2019 oder solange Vorrat reicht. Preise verstehen sich rein netto ohne Abzug und sind nicht bonusfähig. Zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dental bauer GmbH & Co. KG (AGB), welche im Internet jederzeit unter www.dentalbauer.de eingesehen werden können. Alle Abbildungen nur symbolisch. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.

Hotline
00800
77655440
bundesweit zum Nulltarif

www.
dentalbauer.de

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



Schutzbrille iSpec Fit OTG Uvex für Brillenträger

Leichte Überbrille mit neuester Scheibentechnologie. Kein Kontakt der Bügel mit der vorhandenen Korrekturbrille. Gute Abdeckung des Augenraumes. Weiche, besonders flexible Bügelenden. Gewicht: 37 g, Überbrille blau

Art.-Nr. 314226 Stück

EUR 20,30



Schutzbrille iSpec Super Lite Fit Uvex

Die leichteste Schutzbrille der Welt. Flexibles innovatives Bügelkonzept, X-Stream-Technologie für höchsten Tragekomfort und perfekte Passform, aerodynamisch optimierte und inklinierte Scheibengeometrie, Gewicht: 18 g, Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei. Fassung Crystal, Scheibe farblos, UV-Bereich 2-1,2

Art.-Nr. 301327 Stück

EUR 19,80



Schutzbrille iSpec Flexi Fit II Uvex

Extrem leichte und moderne Schutzbrille. Mit transparenter Fassung, weiche Softbügel. Flanken-/Seitenschutz bietet zusätzliche Sicherheit. Einfacher Scheibenwechsel, Bügellänge individuell einstellbar. 100 %iger UV-Schutz. Sehr leicht mit 38 g Gewicht. Fassung blau transluzent, Scheibe farblos.

Art.-Nr. 451490 Stück

EUR 16,50



Schutzbrille Monoart® Light für Brillenträger

Ventilation im Seitenschutz. Kann über Korrekturbrillen getragen werden. Ideal auch für den Patienten. Unbeschichtet, daher sterilisierbar. Gewicht 43 g.

Art.-Nr. 343976 Stück

EUR 7,40



Mundschutz mit Augenschutz Monoart

Filterleistung über 99 %, latexfrei, glasfaserfrei, nickelfrei, kupferfrei, ultraschallvernäht, mit flexiblem Nasenbügel und integriertem Augenschutzschild, 3-lagiger Mundschutz mit Visier, mit Gummizug. Farbe blau.

Art.-Nr. 693399 Packung: 25 Stück

EUR 9,50



Augenspülflasche

Die Augenspülflasche ist bestimmt zum sofortigen Spülen der Augen mit Wasser zur Entfernung eingedrungener Fremdstoffe vor dem Einsetzen einer therapeutischen Behandlung. Als Arbeitssicherheitsmaßnahmen sollten Augenspülflaschen jederzeit griffbereit in der Praxis vorhanden sein.

Art.-Nr. 730611 Flasche: 500 ml

EUR 21,50

HAUTPFLEGE



esemtan® wash lotion

Seifenfreie Waschlotion auf Basis besonders hautmilder Tenside und naturidentischer Wirk- und Pflegekomponenten. Allantoin schützt die Haut vor Austrocknung und Reizungen. Für alle Hauttypen geeignet, auch für Säuglings- und Altershaut. Erhält den Säureschutzmantel der Haut.

EUR 7,90 (1 Liter)

Art.-Nr. 436560 Euroflasche: 1 Liter

Art.-Nr. 724848 Euroflasche: 1 Liter hyclick

EUR 9,90 (1 Liter hyclick)



sensiva® Händedesinfektion*

Alkoholisches Einreibepreparat für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion mit hautpflegenden Komponenten. Ausgeprägte mikrobizide Wirksamkeit durch die Kombination von Alkohol und Milchsäure, keine Austrocknung und Entfettung der Haut durch Zusatz von Feuchthaltefaktoren und Rückfettung, farbstoff- und parfümfrei, deshalb besonders für Allergiker geeignet.

EUR 8,90

Art.-Nr. 395754 Euroflasche: 1 Liter



desderman® pure Händedesinfektion*

Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Einreibepreparat für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Besonders hautverträglich. Der Plus-Effekt für Hautschutz und -pflege: Die alkoholbedingte Austrocknung der Haut wird durch Zusatz von Feuchthaltefaktoren vermieden, ausgeprägte mikrobizide und viruzide Wirkung aufgrund des Ethanolgehalts.

EUR 8,90 (1 Liter)

Art.-Nr. 423685 Euroflasche: 1 Liter

Art.-Nr. 733320 Euroflasche: 1 Liter hyclick

EUR 10,90 (1 Liter hyclick)



sensiva® wash lotion

sensiva wash lotion ist eine besonders hautverträgliche, farbstoff- und parfümfreie Waschlotion auf Syndet-Basis mit einem sehr geringen Allergiepotenzial. Vor/nach hygienischer und chirurgischer Händedesinfektion. Syndet auf Basis hautverträglicher Tenside. Hautschonend, gut reinigend, pH-neutral. Besonders für Allergiker geeignet, da farbstoff-, parfüm- und wollwachs frei.

EUR 7,50 (1 Liter)

Art.-Nr. 362934 Euroflasche: 1 Liter

Art.-Nr. 724771 Euroflasche: 1 Liter hyclick

EUR 9,30 (1 Liter hyclick)

*Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG
desderman® pure Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 78,2 g Ethanol 96 %, 0,1 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Povidon 30, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), (Hexadecyl/octadecyl) (2-ethylhexanoat), Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph. Eur.), 2-Propanol (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser. - Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Ethanol und Biphenyl-2-ol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von desderman® pure gegen Viren schließt behüllte Viren (Klassifizierung „begrenzt viruzid“) und Rotaviren ein. - Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht auf Schleimhäuten anwenden. - Nebenwirkungen: Gelegentlich kann es zu für alkoholische Händedesinfektionsmittel typischen Nebenwirkungen wie Hautirritationen (z.B. Rötung, Trockenheit) kommen. Meist klingen diese Missempfindungen trotz weiterer Anwendung bereits nach 9-10 Tagen wieder ab. Auch Kontaktallergien können auftreten. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht aufgeführt sind. - Warnhinweise und spezielle Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Nur äußerlich anwenden. Bei versehentlichem Augenkontakt mit desderman® pure sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Min. mit viel Wasser spülen. Flammpunkt nach DIN 51755 16 °C. Leicht entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen verschütteter Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. *Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakzinavirus. Die Ergebnisse



sensiva® regeneration cream

Intensive Pflege und Regeneration für beanspruchte und angegriffene Haut.
- reichhaltige Regenerationscreme, gut verteilbar
- farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch geprüft

Art.-Nr. 389748 Stück, 50 ml

EUR 3,30



sensiva® protective emulsion

Besonders hautverträgliche farbstoff- und parfümfreie Öl-in-Wasser-Emulsion zum Schutz vor nicht wasserlöslichen Stoffen.
- hautschützend und -pflegend, feuchtigkeitsspendend
- sehr schnell einziehend, gute Verteilbarkeit
- enthält Allantoin und Bisabolol, dadurch wundheilend und entzündungshemmend
- mindert nicht die Desinfektionswirkung z. B. bei der Händedesinfektion
- farbstoff- und parfümfrei, deshalb besonders für Allergiker geeignet

Art.-Nr. 723307 Stück, 500 ml

EUR 5,90



desmanol® care Händedesinfektion*

Neue alkoholische Händedesinfektion mit besonders hautfreundlicher Pflegeformel – farbstoff- und parfümfrei. Umfassender Schutz und nachhaltige Pflege perfekt kombiniert. Ganzjahresprodukt: schützt das ganze Jahr sicher vor Infektionen. Begrenzt viruzid PLUS: inaktiviert Noroviren in 15 Sekunden. ProPanthenol-Komplex: pflegt mit jeder Händedesinfektion. Pflegeeffekt klinisch bestätigt.
- hygienische Händedesinfektion: 3 ml desmanol® care 30 Sek. in die trockenen Hände einreiben.
- chirurgische Händedesinfektion: Eine ausreichende Menge desmanol® care 90 Sek. in die Hände und Unterarme einreiben.

Art.-Nr. 746495 Euroflasche: 1 Liter

Art.-Nr. 746490 Euroflasche: 1 Liter hyclick

EUR 7,50 (1 Liter)

EUR 9,30 (1 Liter hyclick)

lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus desmanol® care 700 mg/g + 99 mg/g, Lösung Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 70,0 g, Ethanol 96% 9,9 g, sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Tetradecan-1-ol, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Sorbitol-Lösung 70% (kristallisierend) (Ph. Eur.), Dexpantenol, Methylthylketon. - Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Die arzneilich wirksamen Bestandteile Propan-2-ol und Ethanol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze* und viele Viren. Die Wirksamkeit von desmanol® care gegen Viren schließt behüllte Viren (Klassifizierung „begrenzt viruzid“) ein. - Gegenanzeigen: desmanol® care ist zur Desinfektion offener Wunden, für die Antiseptikum von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung des Auges nicht geeignet. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. - Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut mit desmanol® care können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Auch allergische Reaktionen (z.B. Kontaktallergien) sind möglich. - Warnhinweise und spezielle Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Nicht in offene Flamme sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Leicht entzündlich. Nicht einnehmen! Bei Augenkontakt die Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen. desmanol® care enthält Cetylstearylalkohol. *gemäß DGHM/VAH-Richtlinien ** Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakzinavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis-B-Virus, HI-Virus.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Nordstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com

Angebote gültig bis 30.06.2019 oder solange Vorrat reicht. Preise verstehen sich rein netto ohne Abzug und sind nicht bonusfähig. Zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dental bauer GmbH & Co. KG (AGB), welche im Internet jederzeit unter www.dentalbauer.de eingesehen werden können. Alle Abbildungen nur symbolisch. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.

Hotline
00800
77655440

bundesweit zum Nulltarif

www.
dentalbauer.de



HAUTPFLEGE



OmniTouch tendency

OmniTouch tendency ist eine sehr hochwertige und reichhaltige Hautpflegecreme für alle Hauttypen. Auch als Gesichtsschmierung zu verwenden. Sie wirkt hautberuhigend, rückfettend und feuchtigkeitsspendend. Die Hautlotion zieht schnell ein und hält die Haut lange feucht und geschmeidig. Sie kann extrem sparsam verwendet werden – maximal einen Hub aus dem Airless-Spender verwenden und sanft einreiben.

Art.-Nr. 345403 Stück: 50 ml

EUR
8,10



Omnicare

Die Waschlotion spendet Haut und Händen die ideale Dosis an Feuchtigkeit und essentiellen Vitaminen (C, E, B5). Die Wirksubstanzen halten die Haut bei hoher Beanspruchung im Gleichgewicht und führen extra Feuchtigkeit zu. Die Haut spannt nicht und wirkt strahlend frisch. Angenehm duftend, dermatologisch getestet.

Art.-Nr. 405222 Euroflasche: 1 Liter

EUR
5,90



Omnihand Gel

Gebrauchsfertiges alkoholisches Händedesinfektionsgel zur hygienischen Händedesinfektion mit remanenter Wirkung (zum Unschädlichmachen von Schadorganismen). Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit dem Gel eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten.

Art.-Nr. 326850 Euroflasche: 1 Liter

EUR
6,90

Omnihand

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Einwirkzeiten Bakterien (inkl. MRSA) und Pilze (Candida albicans):
– hygienische Händedesinfektion nach VAH/DGHM und EN 1500: 30 Sekunden
– chirurgische Händedesinfektion nach VAH/DGHM und EN 12791: 1 Minute
– TbB (Tuberkulose) nach EN 14348 (hohe Belastung): 30 Sekunden
– behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV): 15 Sekunden
Omnihand ist als Arzneimittel zugelassen.

Art.-Nr. 314086 Euroflasche: 1 Liter

EUR
6,50



GLOVE'N CARE Handcreme

Besonders wirkungsvolle Handcreme. Angereichert mit den heilenden Salzen des Toten Meeres. Beruhigt die angegriffenen Hände, besonders dann, wenn Sie täglich Einmalhandschuhe tragen müssen. Zieht gut ein, angenehmer Geruch.

Art.-Nr. 405718 Tube: 100 ml
Art.-Nr. 424383 Pumpspender: 250 ml

EUR
15,40
(100 ml)

EUR
37,40
(250 ml)

KENNZEICHNUNGSSYSTEME



Kein Zutritt für Unbefugte

Folien-Etikett. Material: Folie, selbstklebend
Format: 148 mm x 105 mm

Art.-Nr. 706753

EUR
5,50



Reine Zone

Folien-Etikett. Material: Folie, selbstklebend
Format: 148 mm x 105 mm

Art.-Nr. 706754

EUR
5,50



Unreine Zone

Folien-Etikett. Material: Folie, selbstklebend
Format: 148 mm x 105 mm

Art.-Nr. 706755

EUR
5,50

Desinfizierbar!
Für den Hygiene-
rahmenplan im
Aufbereitungs-
raum!



QM Klapptafel-System inkl. 10 Klapptafeln

Zur Wandbefestigung oder mit Stativ für die Tischbefestigung wählbar. Stabiler Metallrahmen mit 10 klaren Sichttüren für DIN A4-Dokumente mit Drehlagerung. Öffnung oben. Das Klapptafel-System ist das ideale Produkt, wenn Informationen in Bereichen sichtbar sein sollen, in denen die Gefahr von Bakterienentwicklung herrscht. Die Sichttafel stoppt Keim- und Bakterienentwicklung. Befestigungsmaterial bestehend aus Schrauben, Dübeln und Zwischenstück. Antimikrobiell/Desinfizierbar.

Art.-Nr. 725865 Stück mit Wandbefestigung
Art.-Nr. 725866 Stück mit Stativ

EUR
98,00
(Wand)

EUR
148,00
(Stativ)

Abfallentsorgung von A-Z
in Kooperation mit dental bauer

flexibel, kostengünstig und schnell



Der richtige Partner für die professionelle Entsorgung ...

... ist heutzutage flexibel, kostengünstig und vor allem schnell da, wenn man ihn braucht.

All diese Merkmale erfüllt der zertifizierte Entsorgungsfachbetrieb enretec GmbH mit seiner einfachen aber überzeugenden Entsorgungslösung. Sie entscheiden, welche Behälter Sie für welche Abfallarten benötigen und wann Sie diese entsorgen lassen möchten. enretec steht Ihnen in allen Fragen zum Thema Entsorgung zu Seite und wickelt von der Behälterlieferung bis hin zum Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung alles ab.

Sie verfügen noch nicht über die geforderten stoß- und stichfesten Sammelbehälter für Ihre scharfen und spitzen Gegenstände? Dann stellt Ihnen enretec diese inkl. Entsorgungsservice kostengünstig zur Verfügung. Oder haben Sie in naher Zukunft eine Praxisbegehung und möchten sich dafür z. B. die fachgerechte Entsorgung Ihrer Amalgamauffangbehälter bestätigen lassen? Für enretec kein Problem! Innerhalb von 24 Stunden wird der gefüllte Behälter in der Praxis abgeholt und der entsprechende Nachweis, auf Wunsch auch per E-Mail, zur Verfügung gestellt. Auch die Entsorgung von medizinischen Elektrogeräten nimmt der Entsorger schnell und unkompliziert vor. Vertrauen Sie auf über 30 Jahre Erfahrung im Bereich der dentalen Abfallentsorgung.

Dies ist ein Service von dental bauer.

Als Entsorgungsspezialist übernimmt enretec die gesamte logistische Abwicklung und den persönlichen Kundenkontakt. Fragen Sie Ihr uns nach dem Entsorgungsservice!

Tel.: 0800 805 432 1 (kostenfrei)
Fax: 0800 777 888 3
E-Mail: du@enretec.de
Web: www.enretec.de



Angebote gültig bis 30.06.2019 oder solange Vorrat reicht. Preise verstehen sich rein netto ohne Abzug und sind nicht bonusfähig. Zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dental bauer GmbH & Co. KG (AGB), welche im Internet jederzeit unter www.dentalbauer.de eingesehen werden können. Alle Abbildungen nur symbolisch. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.

Hotline
00800
77655440
bundesweit zum Nulltarif

www.dentalbauer.de

dental
bauer



Jetzt über 60.000
Artikel schnell und
einfach im Online-
Shop bestellen!



Stand: Juli 2018

Deutschland

PLZ-Gebiet 0

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Döbeln
Weststraße 20
04720 Döbeln
Tel +49 3431 7131-0
Fax +49 3431 7131-20
E-Mail doebeln@dentalbauer.de

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Chemnitz
Annaberger Straße 73
09111 Chemnitz
Tel +49 371 530083-0
Fax +49 371 530083-11
E-Mail chemnitz@dentalbauer.de

PLZ-Gebiet 2

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Kiel
Haselbusch 10
24146 Kiel
Tel +49 431 535501-3
Fax +49 431 535501-59
E-Mail kiel@dentalbauer.de

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Oldenburg
Gerhard-Stalling-Straße 41
26135 Oldenburg
Tel +49 441 20490-0
Fax +49 441 20490-99
E-Mail oldenburg@dentalbauer.de

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Salzwedel
Gartenstraße 28
29410 Salzwedel
Tel +49 3901 30844-0
Fax +49 3901 30844-30
E-Mail salzwedel@dentalbauer.de

PLZ-Gebiet 3

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Gütersloh
Vollrath-Müller-Straße 10
33330 Gütersloh
Tel +49 5241 99735-0
Fax +49 5241 99735-60
E-Mail guetersloh@dentalbauer.de

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Kassel
Kasseler Straße 62
34277 Fuldabrück
Tel +49 561 70933-0
Fax +49 561 70933-99
E-Mail kassel@dentalbauer.de

PLZ-Gebiet 4

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Düsseldorf
Mündelheimer Weg 48
40472 Düsseldorf
Tel +49 211 658510-0
Fax +49 211 658510-19
E-Mail duesseldorf@dentalbauer.de

PLZ-Gebiet 5

Bruns + Klein Dentalfachhandel GmbH
Im Mettericher Feld 5-7
56072 Koblenz
Tel +49 261 92750-0
Fax +49 261 92750-40
E-Mail info@bk-dental.de

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Hamm
Hafenstraße 14
59067 Hamm
Tel +49 2381 7997-0
Fax +49 2381 7997-99
E-Mail hamm@dentalbauer.de

PLZ-Gebiet 6

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Frankfurt
Voltenseestraße 2
60388 Frankfurt
Tel +49 6109 5088-0
Fax +49 6109 5088-77
E-Mail frankfurt@dentalbauer.de

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Saarland
Hans-Wilhelmi-Straße 4
66386 St. Ingbert
Tel +49 6894 99835-0
Fax +49 6894 99835-99
E-Mail st.ingbert@dentalbauer.de

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Mannheim
Dynamostraße 13
68165 Mannheim
Tel +49 621 438501-0
Fax +49 621 438501-13
E-Mail manheim@dentalbauer.de

PLZ-Gebiet 7

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Stuttgart
Curierstraße 4
70563 Stuttgart
Tel +49 711 615537-3
Fax +49 711 615537-429
E-Mail stuttgart@dentalbauer.de

dental bauer GmbH & Co. KG
Ernst-Simon-Straße 12
72072 Tübingen
Tel +49 7071 9777-0
Fax +49 7071 9777-50
E-Mail info@dentalbauer.de

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Konstanz
Max-Stromeyer-Straße 172
78467 Konstanz
Tel +49 7531 94236-0
Fax +49 7531 94236-2
E-Mail konstanz@dentalbauer.de

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Freiburg
Jechtinger Straße 10
Gewerbegebiet Haid
79111 Freiburg
Tel +49 761 45265-0
Fax +49 761 45265-65
E-Mail freiburg@dentalbauer.de

PLZ-Gebiet 8

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Augsburg
Zirbelstraße 58
86154 Augsburg
Tel +49 821 420940-0
Fax +49 821 420940-19
E-Mail augsburg@dentalbauer.de

PLZ-Gebiet 9

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Nürnberg
Ostendstraße 196
90482 Nürnberg
Tel +49 911 59833-0
Fax +49 911 59833-222
E-Mail nuernberg@dentalbauer.de

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Regensburg
Prüfenerger Straße 35
93049 Regensburg
Tel +49 941 78533-3
Fax +49 941 78533-55
E-Mail regensburg@dentalbauer.de

Österreich

profimed Vertriebsgesellschaft mbH
Brühlstraße 17a
6922 Wolfurt/Bregenz
Tel +43 5574 777-27
Fax +43 5574 642-12
E-Mail office@profimed.at
www.profimed.at

profimed Vertriebsgesellschaft mbH
Prinz-Eugen-Straße 19
4020 Linz
Tel +43 732 775760
Fax +43 5574 642-12
E-Mail linz@profimed.at
www.profimed.at

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Graz
Feldkirchner Straße 11-15
8054 Seiersberg
Tel +43 316 281616-0
Fax +43 316 281616-99
E-Mail graz@dentalbauer.at

Schweiz

dema dent AG
Hauptsitz
Grindelstrasse 6
8303 Bassersdorf
Tel +41 44 838 65 65
Fax +41 44 838 65 66
info@demadent.ch
www.demadent.ch

dema dent AG
Freiburgstrasse 435
3018 Bern
Tel +41 31 930 80 10
Fax +41 31 930 80 11
info@demadent.ch
www.demadent.ch

dema dent AG
Lagerstrasse 4
9200 Gossau
Tel +41 71 314 22 00
Fax +41 71 314 22 01
info@demadent.ch
www.demadent.ch

Niederlande

dental bauer Nederland B.V.
De Steenbok 12
5215 ME 's-Hertogenbosch
Tel +31 73 6900042
Fax +31 73 6900171
E-Mail info@dentalbauer.nl
www.dentalbauer.nl

Hotline
00800
77655440

bundesweit zum Nulltarif

www.
dentalbauer.de